

家庭用


AiMY

AiMY AIR FOOT MASSAGER

エイミー エアーフットマッサージャー

AIM-025

取扱説明書 添付文書 保証書付

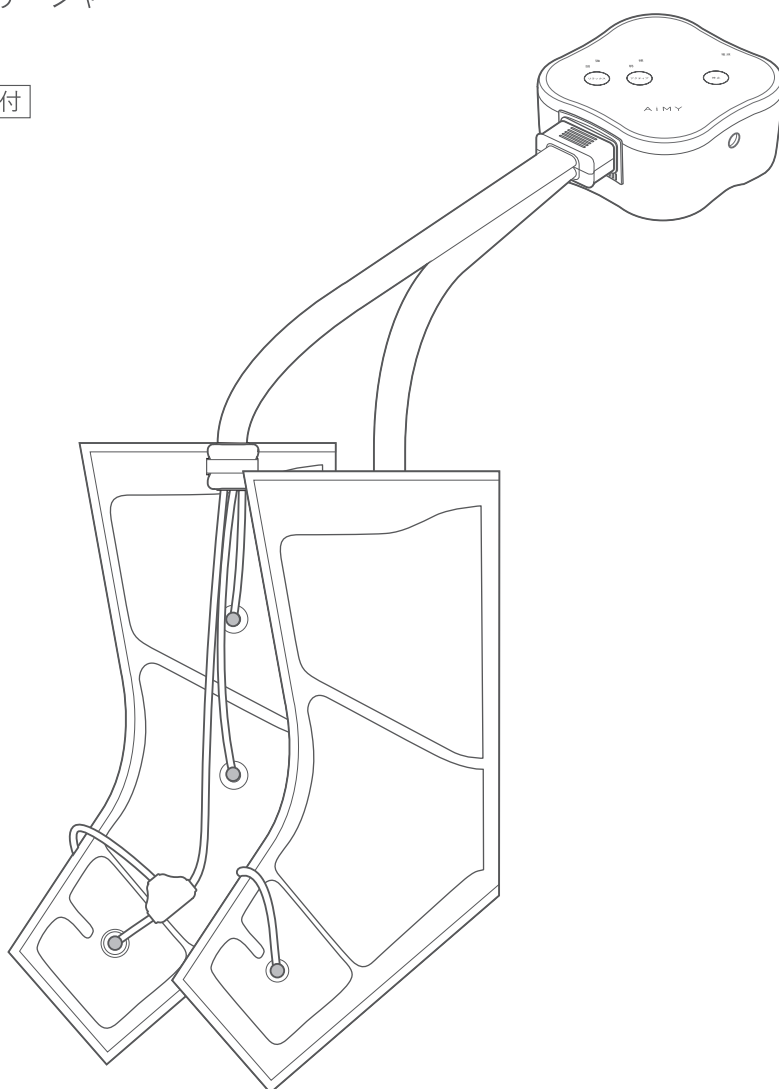

A i M Y A I R F O O T M A S S A G E R

エイミー エアーフットマッサージャー
AIM-025

安全にお使いいただくために	02
各部の名称とはたらき	07
ご使用前に	08
使いかた	09
使用目的または効果	11
エアーホースの取付けかた	11
お手入れについて	12
使用しないときは	12
故障かな？と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

このたびは、エイミー エアーフットマッサージャーをお買い上げいただき、
ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取り扱い説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意

警告



次のような人は使用しない

必ず守る

- ・医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓[塞(そく)栓]症・重度の動脈瘤(りゅう)・急性静脈瘤(りゅう)・各種皮膚炎および各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- ・妊娠中の人、または出産直後の人
- ・骨粗しょう症、せきつい骨折、捻挫(ねんざ)、肉ばなれなど急性[疼(とう)痛性]疾患の人
- ・脚部に重度の血行障害のある人

症状を悪化させるおそれがあります。



自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。

禁止

事故やけがのおそれがあります。



幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない。

禁止

けがや故障のおそれがあります。



必ず守る

医師の治療を受けているときや、下記の人には必ず医師と相談のうえ使用する。

- ・悪性腫瘍のある人
 - ・心臓に障害のある人
 - ・糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人
 - ・治療部位に創傷のある人
 - ・安静を必要とする人
 - ・体温38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状(けん急感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき
 - ・腱鞘(けんしょう)炎の人
 - ・上記以外に身体に特に異常を感じている人
- 事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

ふくらはぎ・足以外のマッサージに使用しない。また付属のアタッチメント以外は使用しない。

特に頭や首などは窒息の恐れがあるため、使用しない。事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

本製品の使用時間は1回15分以内にする 同一箇所への連続使用をさける

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。

注意



必ず守る

使用中に身体に異常があらわれたり感じたとき、または使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する。

そのまま使い続けると事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

他の治療器との併用はしない また1人用機器の為複数の人が同時に使用しない

事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない。また眠りながら使用しない

けがや体調不良をおこすおそれがあります。

使用に関する注意

警告



必ず守る

付属アタッチメントやエアホースが破れていないか確認し、破れたり、はずした状態では使用しない。破れている場合は、どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、勝手に修理などせず、修理業者に修理を依頼する。

事故や故障、けがの原因になります。



必ず守る

エアホースのジョイント部は根元まで確実に差し込む

事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

電源は交流(AC)100Vを使用する。また付属のACアダプター以外は使用しない。(型式:IVP1200-3000P)

守らないと、感電・火災・ショートの原因になります。



必ず守る

他製品に付属のACアダプターを使用しない。

ACアダプターの故障につながります。また感電・ショート・発火の原因になります。



必ず守る

ACアダプターの電源プラグやDCプラグは根元まで確実に差し込む。

感電・ショート・発火の原因になります。



必ず守る

電源プラグのホコリなどは定期的にとる。

ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。



必ず守る

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ずACアダプター本体を持って引き抜く。

電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



必ず守る

操作器からエアホースを抜くときは、エアホースを持たずに、エアホースジョイント部を持って引き抜く。

故障の原因になります。



禁止

絶対に分解・改造・修理をしない

感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。



禁止

AC アダプターの取り扱いについては下記の項目に注意する。

- ・ 傷つけたり、破損させたりしない
- ・ 加工しない
- ・ 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らない
- ・ 使用時には束ねない
- ・ 重いものを載せない
- ・ 挟みこんだりしない
- ・ 操作器やアタッチメントに巻きつけない
- ・ コンセントへの電源プラグの差込みがゆるいときは使用しない

電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



濡れ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電のおそれがあります。



濡れ手禁止

身体がぬれた状態では絶対に使用しない

感電や故障のおそれがあります。



禁止

施療部位に装飾品をつけて使用しない。

機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。



禁止

使用中にアタッチメントに脚を入れた状態で立ち上がったたり、歩いたりしない。

本体に負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。

使用に関する注意

警告



禁止

本製品の上に立ち上がったり、座ったりしない。

事故やけがのおそれがあります。とくに小さなお子様が遊んだりしないようにご注意ください。



禁止

キャスター付きの椅子に座って使用しない

事故やけが、故障の原因になります。



禁止

動作中に脚を入れない

事故やけがの原因になります。

注意



必ず守る

**素足で使用しない
必ずズボンや靴下等を履いて使用すること**
皮膚を痛めるおそれがあります。



必ず守る

使用する前に必ず各種ボタン、タイマーなどが正常かつ安全に作動するか確認する

確認しないと、事故やけがのおそれがあります。



電源プラグを抜く

使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜く

動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。勝手に修理などせず、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



必ず守る

初めて使用する人や使い慣れるまでは必ずマッサージ強さを「弱」で使用する。

事故やけがのおそれがあります。



電源プラグを抜く

雷、地震、停電のときは、直ちに使用を中止し電源プラグをコンセントから抜く

停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。



禁止

アタッチメントに故意に力を入れて無理やり押さえない

けがや故障の原因になります。



禁止

本製品に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない

またエアースホースが折れた状態で使用しない
火災・感電・故障の原因になります。
また誤作動の原因になります。



禁止

操作ボタンを2つ以上同時に押さない。

故障の原因になります。



水場使用禁止

本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない

感電や故障の原因になります。

使用場所についての注意

注意



必ず守る

本製品は椅子やソファなど安定した場所で使用する

不安定な場所で使用すると、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。



禁止

可燃物やストーブなど火気の近くで使用したり、こたつの中で使用しない

火災や事故、低温やけどの原因になります。



禁止

直射日光の当たるところでは使用しない
変形・変色・変質のおそれがあります。



水濡れ禁止

お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない

感電・故障のおそれがあります。



禁止

布団の中や毛布などかぶせて使用しない

操作器内部の温度が高くなり、火災や故障、けがなどの原因になります。

保守についての注意

注意



電源プラグ
を抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグを
コンセントから抜く

守らないと感電やけがのおそれがあります。



電源プラグ
を抜く

長時間使用しない場合は、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く

ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態に
なり、漏電火災の原因になります。



必ず守る

しばらく使用しなかったときは、本製品が
正常にかつ安全に作動することを確認して
から使用する

確認しないと、事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

操作器やアタッチメントにACアダプターのコー
ドやエアホースなどを巻き付けない

またエアホースが折れたまま保管しない

変形や故障の原因になります。



電源プラグ
を抜く

ベンシン・シンナー・アルコール・アルカ
リ性洗剤・漂白剤などで拭いたり、殺虫
剤などをかけない

変形・変色・変質のおそれや、ひび割れ・感
電・引火のおそれがあります。

各部の名称とはたらき


●アタッチメント

エアホースジョイント部
(アタッチメント側)
ジョイントケース

エアホース

エアホースジョイント部
(操作器側)

●操作器

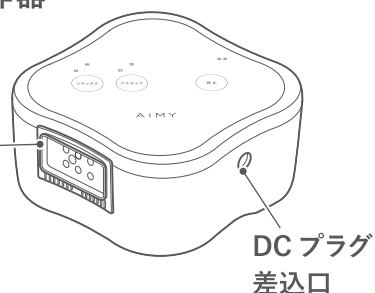

DC プラグ
差込口


●付属品

●AC アダプター (型式: IVP1200-3000P)



⚠ 注意 付属の AC アダプター以外使用しない

●操作部

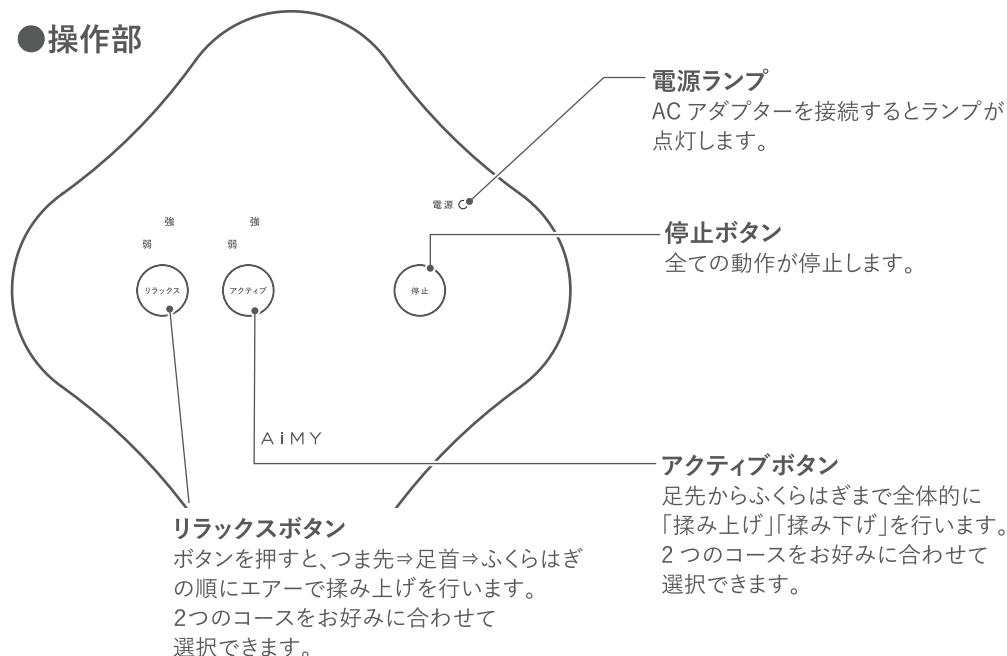


ご使用前に

① アタッチメントやエアホースが破れていないか確認する

破れた状態で使用すると事故や故障、けがのおそれがあります。
どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。


② エアホースジョイント(アタッチメント側)が奥までしっかり差し込まれているか確認する(左右 8 か所)

エアホースジョイントが抜けかけているまたは外れている場合は
P11を参照しながら、取り付けてください。

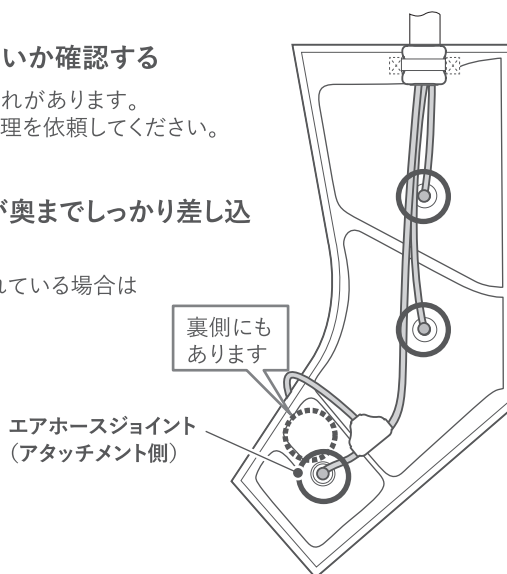


③ 操作器にエアホースを取り付ける

エアホースのエアホースジョイント(操作器側)には挿入方向決めのボスがあります。
図を参考にして、エアホースを操作器に取り付けてください。

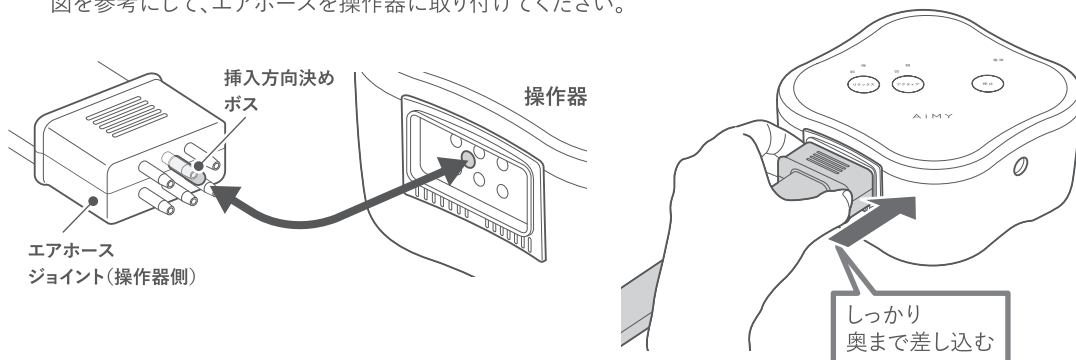

ACアダプターを操作器と接続し、コンセントに差し込む

- ① 操作器のDCプラグ挿入口にACアダプターのDCプラグをしっかりと差し込みます。
- ② コンセントにACアダプターの電源プラグを根元までしっかりと差し込みます。
- ③ 操作器の電源ランプが点灯します。

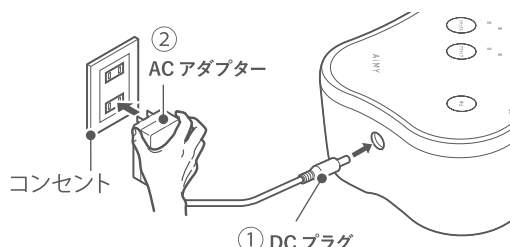

注意 付属の AC アダプター以外
使用しない



使いかた

① エアホースを内側にしてアタッチメントに足を入れる

アタッチメントに足を入れる時、アタッチメントに取り付けられたエアホースが、足の内側に来るようにしてください。



警告

両足をアタッチメントに入れたまま立ったり歩いたりしない。
アタッチメントが破損したり、故障やけがのおそれがあります。




注意

ふくらはぎまである靴下や、柔らかい材質のズボンを着用して使用してください。

使用中につま先が痛い方

つま先が痛い方は、無理のない程度で、アタッチメント先端部からつま先を出してご使用いただけます。
それでも痛いなど、身体に異常があらわれたり感じたときは直ちに使用を中止してください。

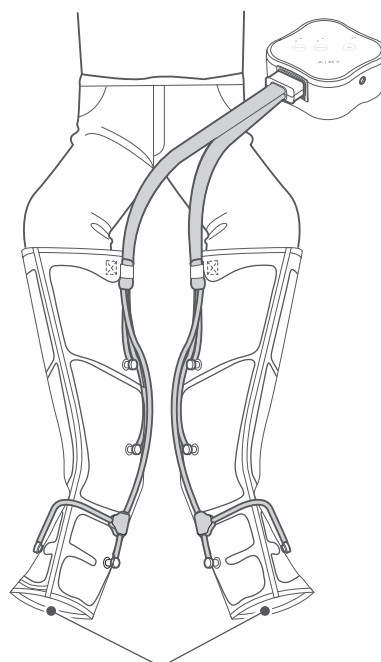


アタッチメント先端部

② 「リラックス」ボタンを押して、マッサージをする

- 「リラックス」ボタンを押すと〈弱〉ランプが点灯し、マッサージが開始します。
- 「リラックス」ボタンを押すごとに強さが切り替わります。
- 約15分で自動的にマッサージが終了します。


※途中でコース・強さを切り替えてもマッサージ開始から15分で終了します。

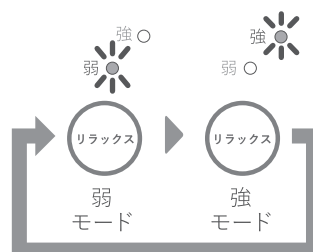

③ 「アクティブ」ボタンを押して、マッサージをする

- 「アクティブ」ボタンを押すと〈弱〉ランプが点灯し、マッサージが開始します。
- 「アクティブ」ボタンを押すごとに強さが切り替わります。
- 約15分で自動的にマッサージが終了します。

※途中でコース・強さを切り替えてもマッサージ開始から15分で終了します。

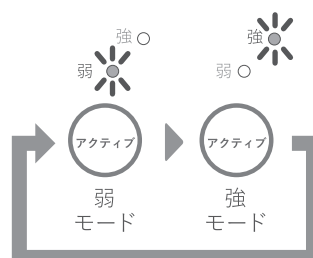

マッサージの特長(時間：約 15 分)

リラックス	弱	つま先⇒足首⇒ふくらはぎの順に、下から上に加圧⇒保持⇒解放の動作をすることで血行を促進します。
	強	「弱」コースより加圧・保持する時間が長く、強めのマッサージを行います。
アクティブ	弱	つま先からふくらはぎまで全体をマッサージ。「揉み上げ」「揉み下げ」動作を行い、疲労回復を促します。
	強	「弱」コースより「揉み下げ」動作を長めに行います。



注意

初めて使用する場合は必ず「弱」から使用する。
慣れてきたらお好みのエアースタrengthでマッサージしてください。

マッサージを途中でやめる


身体に異常を感じたり、非常事態が起こった場合

停止ボタンを押してください。



すべての動作が停止します。
電源プラグをコンセントから抜いてください。

停止ボタンを押してください。
操作器からエアホースを抜いてください。

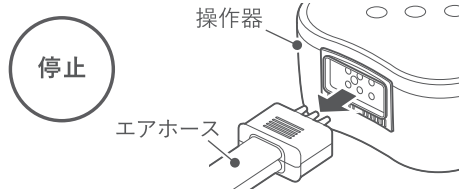


すべての動作が停止します。
電源プラグをコンセントから抜いてください。

④ 使い終わったら必ず AC アダプターをコンセントから抜く



警告

本製品の使用時間は1回15分以内にする。
15分を超えて連続で使用すると、事故や
体調不良をおこすおそれがあります。

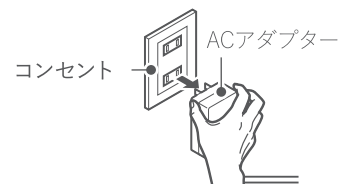

使用目的または効果


あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用するこゝと。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす

エアホースの取り付けかた

アタッチメントからエアホースが抜けかけているまたは外れている場合は、下記の内容を確認しながら、エアホースを取り付けてください。

⚠ 注意 アタッチメントからエアホースを取り外さない。
エアー漏れの原因になりますので、エアホースを取り外さないようにしてください。

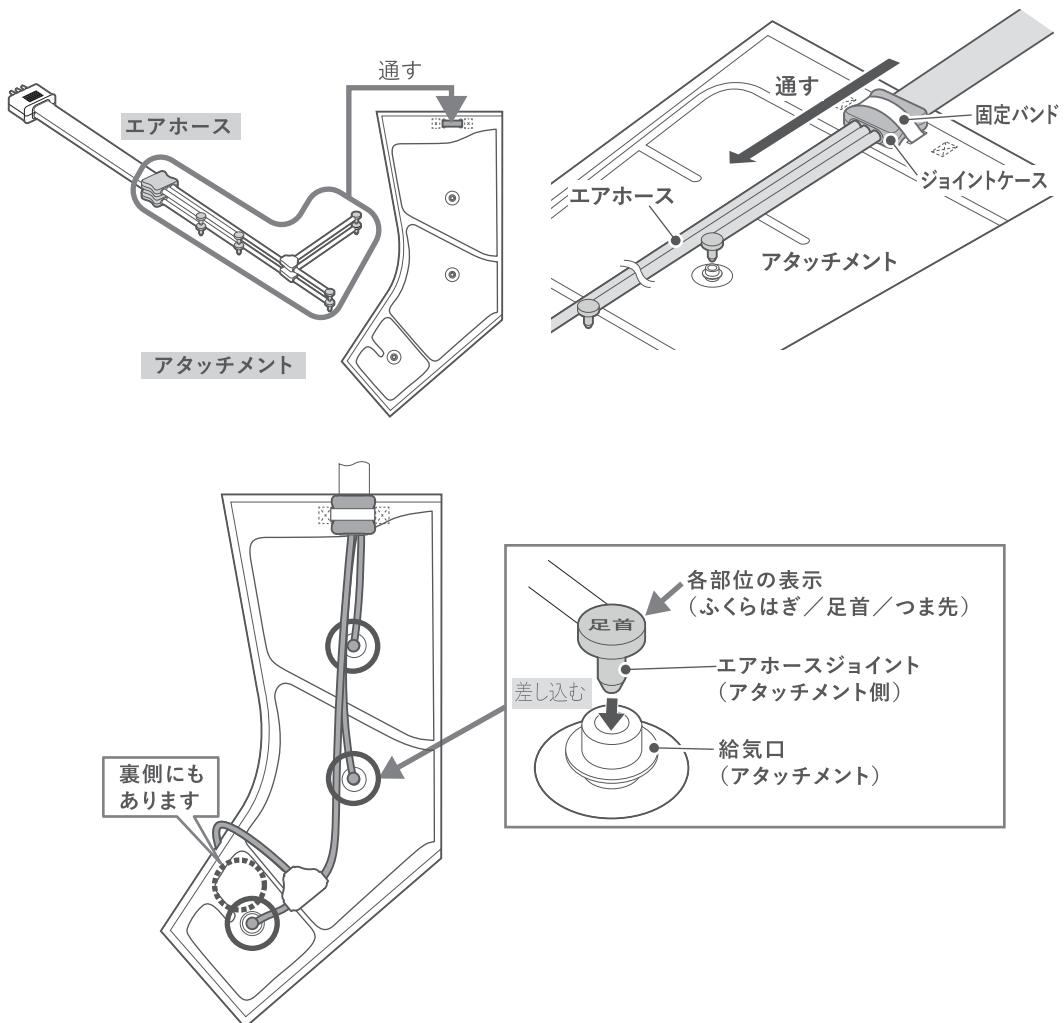

お手入れについて

アタッチメント・操作器のお手入れ

次回使用時に支障がないように、お手入れを行ってください。



警告 お手入れをするときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜く
またぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない

- ① かるい汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ② 汚れのひどいときは、水または中性洗剤を染み込ませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。
ただし、操作器やエアホース内部に水などが入らないようにご注意ください。
- ③ 自然乾燥でよく乾かしてください。

使用しないときは

使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本製品に布などをかけホコリなどがつかないようにしてください。

エアホースや AC アダプターのコードなどは束ねず、ねじれをほどいて保管してください。
また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

長年ご使用の「エアフットマッサージャー AIM-025」の点検を！

こんな症状はありませんか？



愛情点検

- AC アダプターやコードが異常に熱い
- 電源コードやエアホースに深い傷や変形がある
- 焦げ臭いにおいがする
- ボタンを押しても時々動作しないことがある
- その他異常や故障がある

ご使用の中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し AC アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体のルールに従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんな時は	原因	対処
動作しない	●コンセントからACアダプターの電源プラグがはずれている。	●電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。
	●操作器とACアダプターが正しく接続されていない。	●操作器のDCプラグ差込口にACアダプターのDCプラグを差し込んでください。
動作中に停止した	●タイマーがはたらき、動作が止まっている。	●連続使用を避け、30分以上時間をあけてから、もう一度操作してください。
ジョイント部から「シュー」音 (本体側・操作器側)	●アタッチメント・操作器からエアホースジョイントが外れている。 または抜けかけている。	●アタッチメントもしくは操作器にエアホースジョイントを正しく確実に差し込んでください。
エアーが入らない または 抜けない	●エアホースが折れている。 またはエアホースの上に物が乗っている。 ●構造上アタッチメントのエアーが抜けにくい場合があります。	●エアホースの折れを直してください。 またホースの上になにもないことを確認してください。 ●緊急の場合、またはエアーが抜けにくい場合は、直ちにエアホースを操作器から抜いてください。
動作音が大きい	●構造上ある程度の動作音が発生します。 機能などに影響はありません。	



点検後も異常がある

ただちに
使用中止



販売店に点検・修理を依頼してください

仕様

販売名・型番	エイミー エアーフットマッサージャー AIM-025
医療機器認証番号	303AABZX00056000
医療機器分類	管理医療機器
類別／一般的名称	機械器具 77 バイブレーター／家庭用エアマッサー器
電気定格	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	17W
本体定格電圧	DC12V
本体消費電力	12W
定格時間	15 分
タイマー	約 15 分
着圧コース設定エア圧力	つま先：約 24 kPa 足首：約 22 kPa ふくらはぎ：約 20 kPa
外形寸法（mm）	アタッチメント：幅 330× 高さ 560× 厚み 20mm 操作器：幅 135× 奥行 135× 高さ 67mm
質量	アタッチメント、エアホース、操作器：（合計）1.3 kg
エアホース長さ	約 0.8m
AC アダプターコード長さ	1.8m
材質	操作器：ABS 樹脂 アタッチメント：ポリウレタン エアホース：シリコーン樹脂、PVC 樹脂、ABS 樹脂
付属品	AC アダプター 型式 IVP1200-3000P
足サイズ	22 ～ 28cm まで
ふくらはぎ周長	32 ～ 40cm まで
原産国	中国
医療機器製造販売業許可番号	25B2X10001
医療機器製造販売元	株式会社 惣田製作所 〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492

製品に表示されているシンボルについて

	直流マーク
---	-------

(1) 保証書（裏表紙）

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合保証書の記載内容に従って修理いたします。

(3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

(4) 補修用部品の最低保有期間

当社はこの「エイミー エアーフットマッサージャー」の[※]補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

(5) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

■お客様相談窓口

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

ナビダイヤル（携帯 OK） 全国どこからでも市内通話料で OK

 **0570-081-634**

【受付時間】 祝日を除く月～金 10：00～17：00（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT 以外の一般回線、PHS、および IP 電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。その場合、下記電話番号へお掛けください。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL：03-3279-1511・1512 FAX：03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋 1-6-5

保証書

持込修理

エイミー エアーフットマッサージャー AIM-025

ご購入日 . . .

保証期間：お買い上げ日より1年間

お客様

お名前

TEL

ご住所 〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1.取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

2.本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

3.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。 | (4)一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障 |
| (2)お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。 | または損傷。 |
| (3)火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。 | (5)指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。 |

4.お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元：株式会社 ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515 www.tsukamoto-aim.co.jp

製造販売元：株式会社 惣田製作所

〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町492

