


AiMY

BEAUTY EYE

エイミー EMS目元美顔器

AIM-BT122

取扱説明書 保証書付

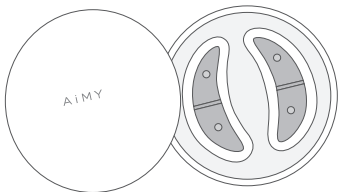

一般家庭用

AiMY BEAUTY EYE

エイミー EMS 目元美顔器 AIM-BT122

| | |
|-------------------------|-----|
| 安全にお使いいただくために | 02 |
| 各部の名前とはたらき | 09 |
| ご使用前に | 10 |
| 使いかた | 13 |
| お手入れについて／保管について | 16 |
| 廃棄方法・リチウムイオン電池の取り扱いについて | 17 |
| 主な仕様 | 18 |
| Q&A／故障かな？と思ったら | 19 |
| 保証とアフターサービス | 20 |
| 保証書 | 裏表紙 |

このたびは、お買い上げいただきありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

表示について



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。



誤った取扱いをしたときに「死亡または重傷^{※1}を負う可能性がある内容」を示します。



誤った取扱いをしたときに「傷害^{※2}を負うことや、物的損害^{※3}が発生する可能性がある内容」を示します。

※1 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

安全記号について



中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意

危険



次に該当する人は使用しない。

医用電気機器や家庭用電気治療器の誤作動により、事故や体調不良をおこすおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計や点滴器などの装着型医用電気機器

警告



医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する。

・悪性腫瘍（しゅよう）のある人・心臓に障害のある人・糖尿病などによる高度な末梢（しょう）循環器障害からくる知覚障害のある人・施療部に創傷のある人・安静を必要とする人・疲労が激しい人・体調がすぐれない人・温度感覚喪失が認められる人・めまい症状のある人・成長過程の人・急性疾患の人・結核性疾患の人・発熱している人・高血圧の人・伝染病疾患の人・血液疾患のある人・内臓疾患のある人・酒気帯びの人・妊娠中、生理中、授乳中の人・眠気をさそう薬を服用中の人・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人・出血性疾患、血友病疾患等の血液異常の人・顔面の神経障害のある人・皮膚病のある人・アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎等、皮フに既往症のある人・アレルギー体質の人・皮膚トラブルのある人（敏感肌やお肌の弱い人）・物理的刺激などによる病的なシミのある人・使用に際して肌に不安のある人・強度の近視の人（-6D 以上）・目の手術をおこなった人（レーシック手術を受けた人はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください）・目の病気のある人（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）・目や顔の手術を受けた人・目や顔に疾患がある人及び治療中の人・上記以外に、特に身体に異常を感じている人
事故やけが、肌のトラブルをおこすおそれがあります。



下記の場合や部位に使用しない

- ・肌に傷や湿しん、はれものなどのある部位
 - ・ニキビや吹出物など皮膚に炎症をおこしている部位
 - ・過度の日焼けなど皮膚に異常のある場合
 - ・化粧品などで皮膚炎をおこしている部位
 - ・顔面黒皮症をおこしている部位
 - ・整形手術をした部位
 - ・眼球および上まぶた
 - ・唇および口腔粘膜
 - ・痛覚、知覚障害をおこしている部位
 - ・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
 - ・かゆみやほてり、ウイルス性のイボ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 事故やけが、肌のトラブルをおこすおそれがあります。



自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

事故やけが、肌のトラブルをおこすおそれがあります。



子供に使用させない。また、使用中は子供を近づけない

事故やけがのおそれがあります。



使用中、痛みや不調を感じたときや、使用后、肌や身体に異常を感じたときは、ただちに使用をやめて医師に相談する

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故やけが、肌のトラブル、体調不良をおこすおそれがあります。



1回の使用時間は10分以内にする


筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、けがや肌のトラブル、体調不良をおこすおそれがあります。



初めて使われる方は、肌の様子を見ながら使用する

けがや肌のトラブル、体調不良をおこすおそれがあります。


 食後および飲酒後は使用しない
体調不良をおこすおそれがあります。


 使用中は眠らない
事故やけがのおそれがあります。


使用に関する注意


警告

 DC5.0V 1.0～2.4Aの USB-ACアダプターを使用する
(急速充電タイプの USB-ACアダプターは使用しない)
火災や感電、故障の原因になります。

 使用前には、必ず本体に破損が無いか確認する
(小さな損傷でもただちに修理を依頼してください)
事故やけがのおそれがあります。

 充電中や使用中に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜く
漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。
お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

 電源プラグ、充電プラグ、コネクタは根元まで確実に差し込む
感電や発熱による火災の原因になります。

 電源プラグ、充電プラグ、コネクタのホコリは定期的にとる
プラグやコネクタにホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因に
なります。アダプターを抜き、定期的乾いた布でふいてください。



電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない

電源コードやプラグの誤った取り扱い、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。

次のことをお守りください。

- ・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。
 - ・電源コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
 - ・電源コードが傷ついたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
 - ・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
 - ・電源コードを本製品に巻きつけない。
 - ・電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。
- 電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



本体の上に立ち上がったたり、踏みつけたりしない

事故やけがのおそれがあります。

とくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。



本体や USB-AC アダプターを落としたり、強い衝撃を与えたりしない

火災や感電、故障の原因になります。



絶対に分解や改造、修理をしない

感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない


感電の原因になります。





水洗いは絶対にしない。また水につけたり水をかけたりしない


火災や感電、故障の原因になります。


注意


-
-  **必ずジェルパッドやマスクを肌と機器の間に装着した状態で使用する**
直接肌に使用すると、かゆみや刺激を強く感じることもあり、事故やけが、肌のトラブルをおこすおそれがあります。


 -  **使用前には、必ず操作ボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する**
事故やけがのおそれがあります。


 -  **使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る**
けがや肌のトラブル、体調不良をおこすおそれがあります。


 -  **イヤリングやネックレスなどのアクセサリ、コンタクトレンズは、
はずして使用する**
事故やけがのおそれがあります。


 -  **周囲に人がいるときは、不意の動きに注意して使用する**
事故やけがのおそれがあります。

 -  **バッグ内の携帯や持ち運び時には単独でポーチなどに入れる**
故障の原因になります。

 -  **電源プラグや充電プラグを抜くときは、コードを待たずにプラグ部分を持って抜く**
火災や感電・故障の原因になります。




 -  **充電時以外は、必ず USB-AC アダプターをコンセントから抜く。**
ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

 -  **他の美容機器との併用はしない**
事故やけが、肌のトラブル、体調不良をおこすおそれがあります。

 -  **ひどい肌荒れや皮膚表面に凸凹がある場合は、その部位への使用を控える**
うぶ毛やヒゲなどによって、まれに刺激を強く感じることもあり、事故やけが、肌のトラブルをおこすおそれがあります。
-





使用場所についての注意

注意

-  ストープなど火気の近くや引火性のもの（アルコール・ベンジン・シンナー、スプレー、除光液など）の近くで使用しない
火災や事故、故障の原因になります。また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。
-  環境温度 35℃以上の場所や、直射日光のあたる場所で使用しない
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。
また変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。
-  浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない
火災や感電、故障の原因になります。

保守についての注意

注意

-  長時間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする
内部部分が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。
正常に動作しないときは、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。
-  お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。
-  長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。
-  お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない
変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。


各部の名前とはたらき

●本体

右側

左側


<表面>

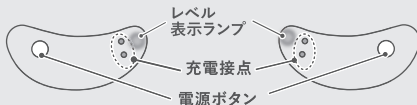


<裏面>



●充電ケース

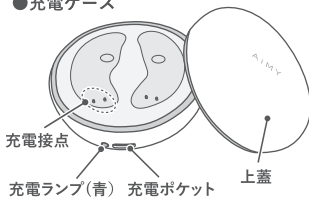

●USBコード(Cタイプ)

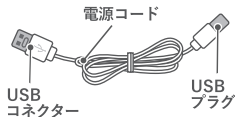

USB-ACアダプターは付属していません
(市販のUSB-ACアダプターをご用意ください)

●アイマスク



●ジェルパッド30枚入り(15セット)



ご使用前に

充電のしかた

- 必ず本体の電源を切った状態で充電してください。
- 初めは、充電ケースは満充電されていませんので充電してからご使用ください。
- 充電している状態では電源が入りません。
- 充電中、本体が熱くなることがありますが異常ではありません。
- 1回の充電で約6回使用できます。(コース②を10分間使用した場合)
※環境温度など使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。



警告



DC5.0V 1.0 ~ 2.4AのUSB-ACアダプターを使用する
(急速充電タイプのUSB-ACアダプターは使用しない)



ぬれた手で電源プラグのコンセントを抜き差ししない



注意




浴室など水のかかるところや湿気の多い場所で使用しない

充電ケース充電方法

- ①本体の電源が切れた状態で USBプラグ
を充電ポケットに、USBコネクターを
お手持ちのUSB-ACアダプターに
差し込み、電源プラグをコンセント
に差し込む

充電が開始されると、
充電ケースの充電ランプが
青に「点滅」します。

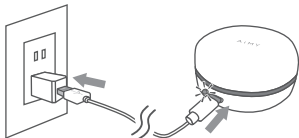


※充電が残り 20% 以下の場合も、充電ランプが青に「点滅」します。

②充電ケース充電時間：約1.5時間

USB-ACアダプターをコンセントから抜き、USBプラグを充電ポケットから抜く

充電が完了すると、充電ケースの充電ランプが青に「点灯」します。

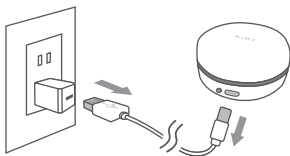


本体充電方法

①本体と充電ケースの充電接点に合うように本体裏面を上にして入れます

②本体充電時間：約2時間

本体裏面の充電お知らせランプが赤に「点滅」します。充電が完了したら赤点灯が15秒続いたのち消灯します

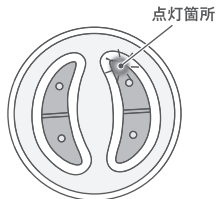

※充電が残り 20% 以下の場合、充電お知らせランプが赤に「点滅」します。

充電の時期

充電電池の性能を十分に発揮させるために、次の事を守ってください。

- 3ヶ月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
- 使用の都度充電しないでください。(バッテリー残がある場合は、本体を充電接点につけずに収納してください)
- 充電推奨温度は 10°C～ 35°Cです。充電推奨温度外では、充電時間が長くなったり、充電しない場合があります。
- 家庭用以外の電源での充電はしないでください。
- 充電中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。



警告



使用前には、必ず本体に破損がないか確認する
(小さな破損でもただちに修理を依頼してください)
事故やけがのおそれがあります。



注意




イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、
はずして使用する
事故やけがのおそれがあります。

相性診断 (パッチテスト)

肌へのトラブルを防止するため、事前に必ず実施してください

ご使用の化粧品も含め、本製品との相性テストで肌のチェックをします

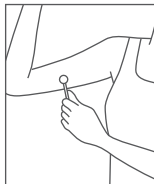

- ① 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどでふきとります。
- ② 洗ったところをしっかりと保湿し、13ページの使いかたに従い、本体のコース②(EMS弱)の状態です約3分間あてます。
- ③ お肌に異常がないことを確認し、48時間経過後異常がなければ使用できます。



注意



塗布部に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた
場合は、ただちにテストを中止して洗い流す

使いかた

ジェルパッド使用時

① 洗顔後の清潔なお肌にご使用ください


使用前に化粧水や乳液などでお肌を充分保湿してください。

※ファンデーションが残っている状態ではジェルがはがれやすくなります。


② ジェルパッドを下記の手順で装着してください

ジェルパッドの装着が正しくできていないと、電極部からの電気が流れず自動検知で約 60 秒後に電源 OFF になります。


<ジェルパッドの装着方法>

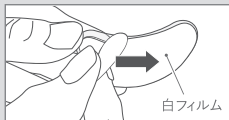


- ① ジェルパッドの白フィルムをはがします。

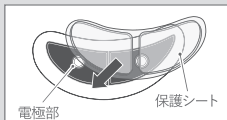

- ② 白フィルムが外れた面を、本体の電極部に合わせて貼りつけます。

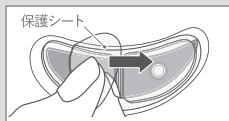

- ③ 肌接触面の透明な保護シートをはがしてください。
※保護シートは保管時に使用するので処分しないでください。

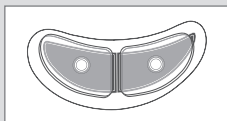

- ④ セッティング完了です。
目元などに貼りつけてご使用ください。

※ジェルパッドの使用目安は2～3回です。


回数に限らずジェルパッドの粘着が弱くなったと感じたら交換してください。

③電源ボタンを長押し(約2秒)で電源をつけます



※起動中、充電接点部に指が触れないようご注意ください。
触れた部分に EMS の電気が流れることがあります。

電源が ON になると、
電極部周りの複数の
赤ランプが点灯します。

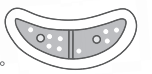

④本体 ON の状態で電源ボタンを押し、コースを切り替えます

ボタンを押すごとに、下記のコース①から④へ順番にモード切替えし、
④の次はコース①に戻り、以後繰り返されます。

| コース名 | 内容 | レベル表示ランプ |
|------|---------------|----------|
| コース① | LED 赤美容照射 | 本体：青点滅 |
| コース② | LED 赤 + EMS 弱 | 本体：青点灯 |
| コース③ | LED 赤 + EMS 中 | 本体：黄点灯 |
| コース④ | LED 赤 + EMS 強 | 本体：赤点灯 |



レベル表示ランプが
目頭側になります

⑤電源ボタンを長押し(約2秒)で電源 OFF します

オートタイマー約 10 分でも電源 OFF します。
必ず本体の電源を切ってから充電ケースに戻してください。

アイマスク使用時

①洗顔後の清潔なお肌にご使用ください

使用前に化粧水や乳液などでお肌を充分保湿してください。

②市販の目元のパックを肌につけます

※必ず電極部が直接肌につかないよう、
パックをしてご利用ください。

※パックによって刺激の感じ方が変わることがあります。

目元のパック



③電源ボタンを長押し(約2秒)で電源をつける

④ 本体 ON の状態で電源ボタンを押し、コースを切り替えます

ボタンを押すごとに、下記のコース①から④へ順番にモード切替えし、④の次はコース①に戻り、以後繰り返されます。

| コース名 | 内 容 | レベル表示ランプ |
|------|---------------|----------|
| コース① | LED 赤美容照射 | 本体：青点滅 |
| コース② | LED 赤 + EMS 弱 | 本体：青点灯 |
| コース③ | LED 赤 + EMS 中 | 本体：黄点灯 |
| コース④ | LED 赤 + EMS 強 | 本体：赤点灯 |

⑤ アイマスクの内側の凹みに本体を入れ、バックの上に本体がくるように調整してアイマスクを装着する

電極部とバックが接触していない場合は電気が流れないため、自動検知で約 60 秒後に電源 OFF になります。



⑥ 電源ボタンを長押し(約 2 秒)で電源 OFF します

オートタイマー約 10 分でも電源 OFF します。

電源ボタン操作の説明



| | |
|--------|----------------------|
| 電源 ON | 電源 OFF 状態で約 2 秒長押しする |
| 電源 OFF | 電源 ON 状態で約 2 秒長押しする |
| コース切替え | 電源 ON 状態で短く押す |

お手入れについて

- ① 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭きとってください。
- ② 汚れがひどい場合は、中性洗剤と水で薄めたものを柔らかい布などに含ませて拭いてください。




⚠ 注意

-  お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。
-  お手入れには、ベンシン、シンナー、アルコール、アルカリ生洗剤、漂白剤などは使用しない。変形や変質など本体の外装を痛めるおそれがあります。

保管について

- 使用後は高温・多湿・直射日光、ホコリの多いところには保管しないでください。

⚠ 警告

-  子供に使用させない。また、使用中は子供を近づけない

- 長時間使用しない場合は、本体から USB-AC アダプターを取り外してください。USB-AC アダプターを取り外すことで放電による消耗、液漏れ、サビなどを防ぐことができます。また、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。

廃棄方法・リチウムイオン電池の取扱いについて

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってください。

⚠ 危険



リチウムイオン電池は充電や以下のことをしない

発熱や発火、破裂の原因になります。

- ・火への投下、加熱をしない。
- ・くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
- ・⊕と⊖を金属などで接触させない。
- ・ネックレス・ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保存しない。
- ・火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。

⚠ 警告



リチウムイオン電池は乳幼児の手の届くところに置かない

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談する。



リチウムイオン電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処置をする

- ・液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。
- ・液が体や衣服についたときは、きれいな水で十分洗い流したあと医師に相談する。



製品を廃棄するとき以外は分解しない

火災や感電、けがの原因になります。

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄またはリサイクルに際しては、当社のお客様相談窓口にお問い合わせください。
- リチウムイオン電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。リチウムイオン電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

主な仕様

| | |
|---------------|--|
| 商品名・型番 | AiMY BEAUTY EYE・AIM-BT122 |
| 定格電圧 | INPUT: DC5V 1A |
| 消費電力（本体動き時） | 充電ケース：約 0.296W、本体：0.074W（片側） |
| 消費電力（充電時） | 充電ケース：約 2W、本体：0.125W（片側） |
| 電池 | 充電ケース：リチウムイオン電池（3.7V 400m Ah） 本体：リチウムイオン電池（3.7V 28m Ah） |
| 充電時間（約） | 充電ケース：1.5 時間、本体 2 時間（0°C以上 45°C以下） |
| 連続使用時間（約） | 充電ケース：5 時間、本体 1 時間（0°C以上 45°C以下） |
| 充電ケースサイズ（約） | 3.5×7.4cm |
| 重量（約） | 118g |
| 本体材質 | 本体：ABS 充電ケース：ABS |
| アイマスクサイズ | 57cm×10cm |
| 電源コード長さ（ケーブル） | 約 1m |
| 付属品 | 専用ジェルパッド 30 枚（15 セット）、アイマスク、 充電ケーブル、取扱説明書兼保証書 |
| オートタイマー（約） | 10 分 |
| EMS レベル | 3 段階 |
| JAN コード | 4571167470839 |

中国製

※バッテリーの寿命は充電・放電の回数により異なります。

Q & A

- Q. 使用時間、使用頻度の目安はありますか？
A. 1日1回約10分程度。
連続で使用する場合は5時間以上間隔をあけることをおすすめします。
- Q. 肌にピリピリ感を感じるのですが？
A. 肌の本体に触れる部位が乾燥しているかもしれません。しっかり保湿してください。
EMSの感じ方には左右差・個人差があります。心地よく感じる強さに調整をして下さい。
- Q. 強く押しあてた方が効果があるのではないかと？
A. 強く押しあてる必要はありません。
肌に負担がかからないよう軽くあててください。
- Q. お風呂場で使用しても大丈夫か？
A. 使用できません。水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり保管しないでください。

故障かな?と思ったら

| こんなときは | 考えられる理由 | こう処置してください |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 動作しない | タイマーが動き、 停止状態になっている | もう一度操作してください (P.14～P.15参照) |
| 点灯しない | 充電が切れている | 充電してください |
| EMSを 感じない | コース①のLEDのみのコース になっている | EMSが流れるコース ②～④にしてください |

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



愛情点検

こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- 電源コードに深い傷や変形がある
- 焦げ臭いにおいがする
- 動作中に異常な音や振動がする
- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある
- その他異常や故障がある

以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス ※必ずお読みください。

(1) 保証書（裏表紙）

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合保証書の記載内容に従って修理いたします。

(3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

(4) 補修用部品の最低保有期間

当社はこの「AiMY BEAUTY EYE」の補修用性能部品※を製造打ち切り後最低5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

(5) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

■ 消耗品の販売

次の部品は消耗品です。（有料）新しい部品をお買い求めの際は、当社の直販サイトまたは以下のお客様相談窓口でもお買い求めいただけます。

※掲載製品の型番・仕様は、2021年12月現在のものです。

予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

| 消耗品名 | 型番 | 入数 |
|--------|----------------|-------------|
| ジェルパッド | AIM-BT122-PA30 | 30枚入(15セット) |

■お客様相談窓口

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

ナビダイヤル（携帯OK）全国どこからでも市内通話料でOK



0570-081-634

【受付時間】 祝日を除く月～金 10：00～17：00

（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT以外の一般回線、PHS、およびIP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。
その場合、下記電話番号へお掛けください。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL：03-3279-1511・1512 FAX：03-3279-1515

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

保証書

持込修理

エイミービューティーアイ AIM-BT122

ご購入日

保証期間：お買い上げ日より1年間

お客様

お名前

TEL

ご住所 〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
 - お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
 - 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
 - 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
 - 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
- お客様の個人情報のお取り扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

発売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

TEL. 03-3279-1511・1512 FAX. 03-3279-1515

www.tsukamoto-aim.co.jp



2021年12月 初版発行