

AiMY


# AIRLY FOOT

エアーフットマッサージャー

エイミー エアリーフット

AIM-039

取扱説明書 保証書付

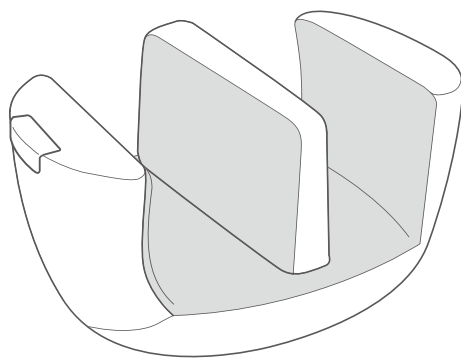

## AiMY AIRLY FOOT

エイミー エアリーフット AIM-039

|               |     |
|---------------|-----|
| 安全にお使いいただくために | 2   |
| 各部の名称とはたらき    | 7   |
| ご使用の前に        | 8   |
| 使いかた          | 9   |
| 使用目的または効果     | 10  |
| お手入れについて      | 11  |
| 使用しないときは      | 11  |
| 仕様            | 12  |
| 故障かな？と思ったら    | 13  |
| 本製品を廃棄するとき    | 13  |
| 保証とアフターサービス   | 14  |
| 保証書           | 裏表紙 |

このたびは、エイミー エアリーフットをお買い上げいただき、  
ありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

### 警告/注意表示について



**警告** 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



**注意** 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの方で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵や近くの方で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵や近くの方で、注意を促す内容を示します。

## 使用者に関する注意



必ず守る

**医療機関で治療中の人や次のような人は必ず、使用する前に医師や理学療法士に相談する**

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍(しゅよう)のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠中や出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・治療部位に創傷のある人
- ・安静を必要とする人
- ・体温 38℃以上(有熱期)の人  
例：急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき
- ・現在、腰痛の人や、過去に腰、脚を傷めたことのある人
- ・腰、脚にしびれがある人
- ・呼吸器に障害のある人
- ・高血圧症の人
- ・内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある人
- ・腰痛(椎間板(ついかんばん)ヘルニア、脊椎(せきつい)すべり症、脊椎分離症)などのある人
- ・変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
- ・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなどの急性疼(とう)痛性疾患の人
- ・背骨に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人
- ・血行障害、血管障害など循環器に障害のある人
- ・頭痛の人
- ・腱鞘(けんしょう)炎の人
- ・頭および顔に疾患がある人
- ・リハビリテーションで利用される人
- ・上記以外、とくに身体に異常を感じている人

事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

**次の人は使用しない**

医師からマッサージを禁じられている人  
例：血栓(塞[そく]栓)症、重度の動脈瘤(りゅう)、急性静脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

症状を悪化させるおそれがあります。



禁止

**自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない**  
事故やけがのおそれがあります。



禁止

**幼児や子供に使用させたり、触らせない  
また本製品の上や、まわりで遊ばせない**  
けがや故障のおそれがあります。



必ず守る

**本製品の使用時間は連続で約15分以内とし、それ以上の使用は避ける**  
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

**使用中に身体に異常があらわれたり、感じたとき、または使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する**  
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

**肌の弱い人は素肌で使用せず、靴下を履いて使用すること**  
皮膚を痛めるおそれがあります。



禁止

**1人用機器の為、複数の人が同時に使用しない**  
事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

**睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない  
また眠りながら使用しない**  
けがや体調不良をおこすおそれがあります。

## 使用に関する注意

### 警告

**必ず守る** ！  
ご使用の前に、必ず本体カバーが外れていないか、破れていないか確認し、外れたり破れた状態では使用しない  
どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、勝手に修理などせず、販売店またはお客様相談窓口にて修理を依頼する  
事故やけがのおそれがあります。

**必ず守る** ！  
足部、ふくらはぎ部のマッサージ以外の目的で使用しない  
(手や首、特に頭には使用しない)  
事故やけが、故障の原因になります。

**必ず守る** ！  
電源は交流(AC)100Vを使用する  
付属のACアダプター以外は使用しない  
(型式:EA036-1200-3000LJ)  
感電・火災・ショートの原因になります。

**必ず守る** ！  
他製品に付属のACアダプターを使用しない  
ACアダプターの故障につながります。また感電・ショート・発火の原因になります。

**必ず守る** ！  
ACアダプターの電源プラグやDCプラグは容易に着脱しないように根元まで確実に差し込む  
感電・ショート・発火の原因になります。

**必ず守る** ！  
電源プラグのホコリなどは定期的にとる  
ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。

**禁止** ！  
絶対に分解・改造・修理をしない  
感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。

**プラグを抜く** ！  
ACアダプターをコンセントから抜くときは、コード部を持たずに、必ずACアダプター本体を持って引き抜く  
また、本体のDCジャックとDCプラグを接続または抜く時は、コード部を持たずに必ずDCジャックとDCプラグを持つこと  
電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

**禁止** ！  
ACアダプターの取り扱いについては下記の項目に注意すること  
・傷つけたり、破損させたりしない  
・加工しない  
・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らない  
・使用時には束ねない  
・重いものを載せない  
・挟みこまない  
・本体に巻きつけない  
・コンセントへの電源プラグの差し込みがゆるいときは使用しない  
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

**禁止** ！  
施療部位に装飾品をつけた状態で使用しない  
機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。

**禁止** ！  
動作中に足を入れたり、本体に足を入れた状態で立ち上がったりしない  
事故やけが、故障の原因になります。

**禁止** ！  
本体および機構部に無理な力をかけたり、上に立ち上がったり、座ったり、踏み台として使用しない  
事故やけがのおそれがあります。とくに小さなお子様が遊んだりしないようにご注意ください。

## 使用に関する注意

### 警告

**禁止** ！  
本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない  
事故や故障の原因になります。

**禁止** ！  
他の治療器との併用はしない  
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

**ぬれ手禁止** ！  
ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない  
感電のおそれがあります。

**ぬれ手禁止** ！  
身体がぬれた状態では絶対に使用しない  
感電や故障のおそれがあります。

### 注意

**必ず守る** ！  
使用する前に必ずボタンやタイマーが正常かつ安全に作動するか確認する  
確認しないと、事故やけがのおそれがあります。

**必ず守る** ！  
使い始めは「弱」から使用し、慣れてきたら好みの強さでマッサージする  
事故やけがの原因になります。

**プラグを抜く** ！  
使用時以外は、必ずACアダプターをコンセントから抜く  
ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電や火災の原因になります。

**プラグを抜く** ！  
本体が動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに電源ボタンを押して使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜く  
漏電やショートなどによる感電、火災の原因になります。勝手に修理などせず、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

**プラグを抜く** ！  
雷、地震、停電のときは、直ちに使用を中止しACアダプターをコンセントから抜く  
停電復帰時に故障や事故、けがのおそれがあります。

**必ず守る** ！  
本製品は底面が丸いため、動作に注意すること  
けがや故障の原因になります。

**禁止** ！  
機構部は故意に力を入れて無理やり押さえつけない  
けがや故障の原因になります。

**禁止** ！  
本製品に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない  
本体カバーを無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない  
火災・感電・故障の原因になります。また誤作動の原因になります。

**禁止** ！  
操作ボタンを2つ以上同時に押さない  
故障の原因になります。

**水濡れ禁止** ！  
本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない  
感電や故障の原因になります。

## 使用場所についての注意

### ⚠ 注意

**必ず守る** 本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使用する  
不安定な場所で使用すると、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。

**必ず守る** 使用前に必ず本体の周囲約2m以内に人や物、ペットがいないことを確認する  
事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。

**注意** 床や椅子に対して傷や振動が気になる場合は、薄手のマットを敷く  
傷や凹みなどの損傷を防ぎます。

**禁止** キャスターがついた椅子などでは絶対に使用しない  
キャスター付の椅子で使用する、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。

**禁止** 移動するときは、引きずらない  
床や畳を傷つけるおそれがあります。

**禁止** 屋外では使用しない  
事故や故障の原因になります。

**禁止** 直射日光の当たるところや、室温が35℃以上になるところでは使用・保管しない  
変形・変色・変質のおそれがあります。

**禁止** 布団の中や毛布などをかぶせて使用しない  
本体の温度が高くなり、火災や故障、けがなどの原因になります。

**禁止** 可燃物やストーブなど火気の近くで使用したり、こたつの中で使用しない  
火災や事故の原因になります。

**水場使用禁止** お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない  
感電・故障のおそれがあります。

## 保守についての注意

### ⚠ 注意

**プラグを抜く** お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く  
守らないと感電やけがのおそれがあります。


**必ず守る** しばらく使用しなかったときは、本製品が正常にかつ安全に作動することを確認してから使用する  
(ACアダプターを容易に着脱しないように正しく確実に接続し、操作ボタンやタイマーなどを確認すること)  
確認しないと、事故やけがのおそれがあります。

**プラグを抜く** 長時間使用しない場合は、必ずACアダプターをコンセントから抜く  
ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。

**禁止** ベンシン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などで拭いたり、殺虫剤などをかけない  
変形・変色・変質のおそれや、ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。

## 各部の名称とはたらき

### ●本体

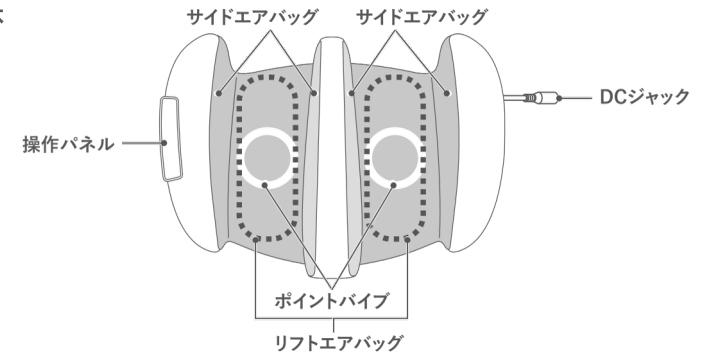


### ●専用台

座った状態でふくらはぎをマッサージする場合に使用します。椅子の高さに合わせてお好みで角度を変えられます。「AIMY」のロゴが入っている側が正面です。



### ●付属品

AC アダプター  
(型式: EA036-1200-3000LJ)

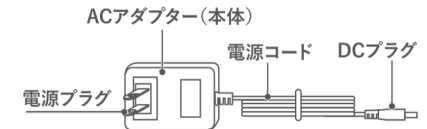

**警告** 付属の AC アダプター以外使用しない

### ●操作パネル

#### 自動コース選択ボタン

プログラムされた 5 つの自動コースをお好みに合わせて選択できます。

#### トータルクイックボタン

#### 足うらボタン

#### ふくらはぎボタン

#### 集中ケアボタン

- ・ソフトモード
- ・ハードモード

ボタンを押すたびに切り替わります。

※各コースの特徴はP10をご参照ください。

**電源ランプ**  
AC アダプターを接続すると、ランプが点灯します。

#### 停止ボタン

停止状態になります。

#### 強さ調節ボタン

エアーの強さを 2 段階で調節できます。  
最初にコースを選択したときランプが点灯します。  
(強弱を切り替えると、動作プログラムも変更になるため、一瞬エアーが抜けることがあります。)


## ご使用の前に

### ① 本体を設置する

本製品は足うらで使用する時と、ふくらはぎで使用する時で足を入れる方向が変わります。

#### 足裏の場合

床や畳などの上に本体を置きます。

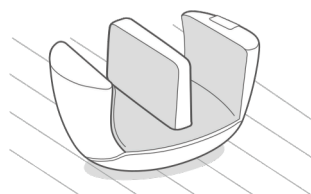


#### ⚠ 注意

床や畳に対して、傷や振動が気になる場合は、薄手のマットを敷いてください。

#### ふくらはぎの場合

専用台の「AiMY」ロゴが正面にある状態で、本体の操作パネルが左側に来るように本体を置きます。

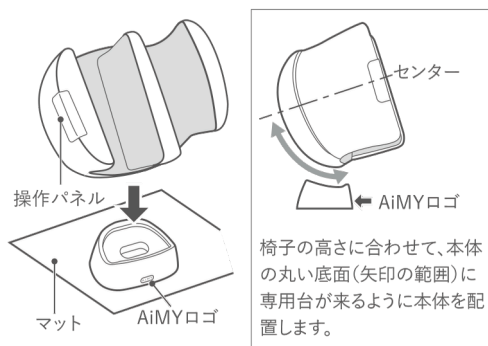


### ② 本体カバーが破れていないか確認する

ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認してください。カバーが破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

### ③ ACアダプターを本体と接続し、コンセントに差し込む

- ① 本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを根元までしっかりと差し込みます。
- ② コンセントにACアダプターの電源プラグを根元までしっかりと差し込みます。
- ③ ACアダプターを接続すると電源ランプが点灯します。

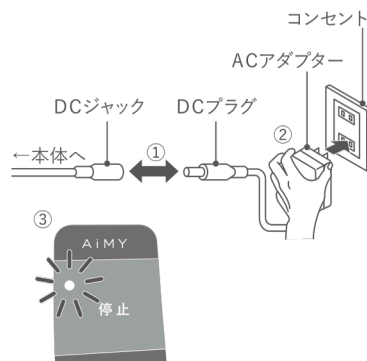

#### ⚠ 警告

付属の AC アダプター以外  
使用しない


## 使いかた

### ① マッサージ部に足を入れる

本製品は足うらで使用する時と、ふくらはぎで使用する時で足を入れる方向が変わります。

#### 足裏の場合

操作パネルを「左」に配置し、足を入れてください。

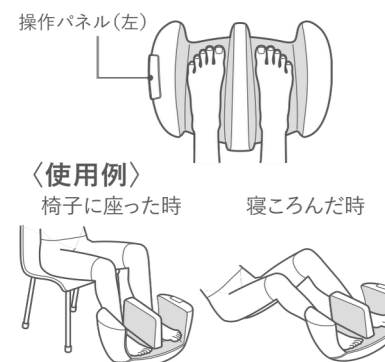


#### ⚠ 注意

キャスター付きの椅子に  
座って使用しない

#### ふくらはぎの場合

操作パネルを「右」に配置し、ふくらはぎを入れてください。

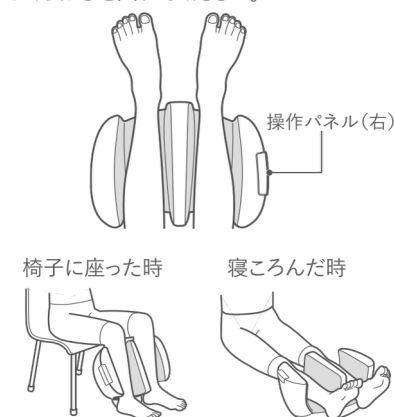


### ② コースを選択する

お好みのコースボタンを押すと動作が開始します。  
選択されたコースはランプで表示されます。  
各コースは動作開始からタイマーで自動的に終了します。

|              |         |
|--------------|---------|
| トータルクイック     | ：約 8 分  |
| 足うら／ふくらはぎ    | ：約 15 分 |
| 集中ケア ソフト／ハード | ：約 15 分 |

#### ⚠ 注意

動作中にコースを変更しても、最初にコースボタン  
を押してから約 15 分で自動的に停止します。

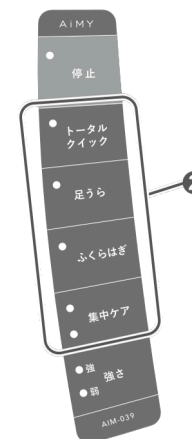


## 使いかた

### ③ 強さを調節する

ボタンを押すごとにマッサージの強さが切り替わり、選択された強さをランプで表示します。



- ・初めて使用する場合や、使い始めは「弱」から使用し、慣れてきたら好みの強さでマッサージする
  - ・強弱を切り替えると、動作プログラムが切り替わるため、一瞬エアーが抜けることがあります。
- 故障ではありませんのでご注意ください。

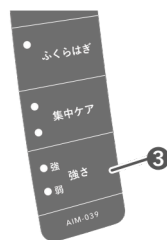


### 各コースの特徴

| トータルクイック |     | 各コースの特徴を組み合わせ、短時間でトータルケアができるコース。                                              |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 足うら      |     | サイドエアバッグとリフトエアバッグでつま先から足首をギュッとつかんで揉み上げます。また足裏をポイントパイプで押し上げながら土踏まずを刺激します。      |
| ふくらはぎ    |     | サイドエアバッグが交互または同時に複雑に動いて、ふくらはぎをしっかり揉み上げます。またふくらはぎの裏をポイントパイプでギュッと押し上げ、コリをほぐします。 |
| 集中ケア     | ソフト | ポイントパイプでアプローチしながら、サイドエアバッグで揉み上げ、足の疲れを集中してケアします。                               |
|          | ハード | ソフトコースよりも強い力で揉み上げて、ポイントパイプでアプローチしながら、足の疲れをリセットします。                            |

### ④ 使用後はACアダプターをコンセントから抜く

- ① ACアダプターをコンセントから抜きます。
- ② 本体のDCジャックからACアダプターのDCプラグを抜きます。

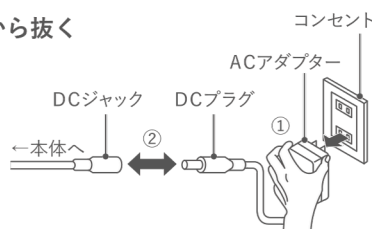

## 使用目的または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす


## お手入れについて

次回使用時に支障がないように、お手入れを行ってください。

### 本体・操作パネル・専用台

※本体カバーは取り外しできません。

- ① 乾いたやわらかい布で拭いてください。
- ② 汚れのひどいときは、水または薄めた中性洗剤を染み込ませてよくしぼった布で拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。
- ③ 自然乾燥させ、よく乾かしてください。

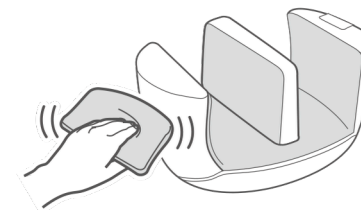

お手入れをするときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない

## 使用しないときは

使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本製品に布などをかけてホコリなどがつかないようにしてください。

コンセントからACアダプターを抜いて、コードに傷がつかないように保管してください。

使用後は汚れやホコリを、乾いたやわらかい布などできれいに拭き取ってから保管してください。

ACアダプターのコードなどは束ねず、ねじれをほどいて保管してください。

また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

長年ご使用の「エイミー エアリーフット・AIM-039」の点検を!

| こんな症状はありませんか? |                                                                                                                           | ご使用の中止                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ● ACアダプターや電源コードが異常に熱い<br>● 電源コードに深い傷や変形がある<br>● 焦げ臭いにおいがする<br>● 操作中に異常な音や振動がする<br>● ボタンを押しても時々動作しないことがある<br>● その他異常や故障がある | このような症状のときは、故障や事故防止のため、「停止」ボタンを押して電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。その後、必ずお買い上げ販売店またはお客様相談窓口にて点検・修理をご相談ください。 |
|               | 愛情点検                                                                                                                      |                                                                                                         |

## 仕様

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名／型番        | エイミー エアリーフット／ AIM-039                                                 |
| 医療機器認証番号      | 307AABZX00033000                                                      |
| 医療機器分類        | 管理医療機器                                                                |
| 類別／一般の名称      | 機械器具 77 バイブレーター／家庭用電気マッサージ器                                           |
| 電気定格          | AC100V 50／60Hz                                                        |
| 定格消費電力        | 20W                                                                   |
| 本体定格電圧        | DC12V                                                                 |
| 本体消費電力        | 17W                                                                   |
| 定格時間          | 15分                                                                   |
| 外形寸法          | 本 体：幅 450× 奥行 340× 高さ 300mm<br>専用台：幅 190× 奥行 160× 高さ 85mm             |
| 質量            | 本 体：約 4.0kg<br>専用台：約 0.22kg                                           |
| 専用 AC アダプター   | 型式：EA036-1200-3000LJ                                                  |
| AC アダプターコード長さ | 約 1.8m                                                                |
| 材質            | 本 体：スチールパイプ・ウレタンフォーム<br>張り地：ポリエステル 100%<br>(機構部：ポリエステル 92%・ポリウレタン 8%) |
| 製造国           | 中国                                                                    |
| 医療機器製造販売元     | 株式会社 惣田製作所<br>〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492                                |
| 医療機器製造販売業許可番号 | 25B2X10001                                                            |

### ■製品に表示されているシンボルについて

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 直流マーク |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

### ■AC アダプターに表示されているシンボルについて

|                                                                                     |                                                   |                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 医療機器としてPSE（電気用品安全法）と同等の電気安全試験に適合                  |  | 家庭内使用          |
|  | 製品の再資源化を目的とし、製品を処分する際には埋め立て処理を行わずにリサイクルするよう求めるマーク |  | 耐短絡安全絶縁変圧器     |
|  | ヒューズ定格                                            |  | DCプラグ極性センタープラス |
|  | 2重絶縁表示                                            |                                                                                     |                |

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店または、お客様相談窓口にお問い合わせください。

| こんな時は                 | 原因                                                                 | 対処                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 電源ランプが点灯しない           | コンセントからACアダプターの電源プラグがはずれている。                                       | 電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。                              |
| 動作しない                 | 本体とACアダプターが正しく接続されていない。                                            | 本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを差し込んでください。                          |
| 強さを切り替えるとエアーが抜けることがある | 動作プログラムが強・弱で切り替わるため、一瞬エアーが抜けることがある。                                | 動作プログラム上、やむをえず発生するもので、故障ではありません。                            |
| 途中で止まった               | タイマーがはたらいて、動作が停止し、待機状態になっている                                       | 各コースの設定時間でタイマーが働き停止します。<br>1日2回を目安に、連続使用は避けてください。           |
| 待機中にランプが全点滅する         | ポンプやバイブモーターに異常が発生している。                                             | ただちにコンセントからACアダプターを抜いて使用を中止し、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口修理を依頼してください。 |
| 動作中の音が気になる            | エアバッグがふくらむとき、しばむときの「ブシュー」「カチッ」という音。<br>バイブレーターやポンプが動くときの「ブーン」という音。 | 構造上やむをえず発生するもので、機能などに影響はありません。                              |

## 本製品を廃棄するとき

地球環境保護のため、廃棄するときにはそのまま放置しないで、各自治体のルールに従って廃棄してください。

## 保証とアフターサービス

### ■ 保証について

#### (1) 保証書(裏表紙)

保証書はお買い上げ販売店で所定事項を記入しお渡し致します。所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

#### (2) 保証期間中の修理について

保証書の記載内容に従って修理をいたします。保証期間中でも有料になる場合もありますので、保証書の内容をよくお読みください。

#### (3) 保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買い上げ販売店または、お客様相談窓口にご相談ください。

#### (4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### (5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料となります。

### ■ お客様相談窓口

ナビダイヤル(携帯OK) 全国どこからでも市内通話料でOK

 **0570-081-634**

【受付時間】 祝日を除く月～金 10:00～17:00 (都合によりお休みさせていただく場合がございます)

※お客様が加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHS、およびIP電話など)によっては、ご利用できない場合がございます。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

### ■ アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店または、お客様相談窓口にて点検・修理を依頼してください。

アフターサービスをお申し付けの際は、下記内容をお知らせください。

型番 …… AIM-039  
故障状態 …… できるだけ詳しく  
ご氏名・ご住所・お電話番号

### ■ 送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、弊社では原則センドバック方式(お客様にて弊社修理窓口に発送いただく方法)とさせていただきます。

往路: お客様負担 / 復路: 弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

## 保証書

持込修理

エイミー エアリーフット AIM-039

ご購入日

保証期間: お買い上げ日より1年間

お客様

お名前

TEL

ご住所

〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
  - お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
  - 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
  - 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
  - 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。

#### 4. お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元: 株式会社ツカモトコーポレーション エイム部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

<https://www.aimy-net.com>



2026年7月 初版 発行