

保証書

持込修理

エイミー フェムエア スイング AIM-FN074

ご購入日

保証期間：お買い上げ日より 1 年間

お客様

お名前

TEL

ご住所 〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。(4) 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
(2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
(3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。(5) 指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。
4. お客様の個人情報のお取り扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。


AiMY
FEMAIR SWING

エイミー フェムエア スイング

AIM-FN074

取扱説明書

保証書付

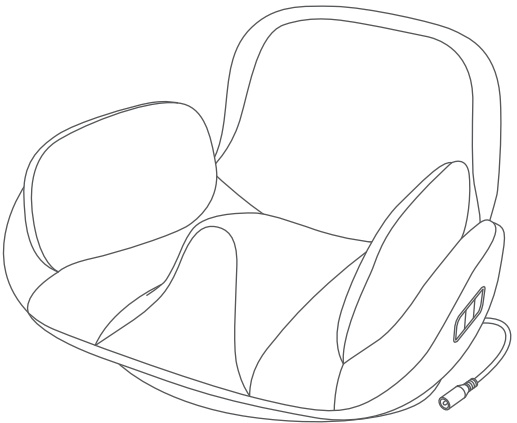

発売元：株式会社 ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515 www.tsukamoto-aim.co.jp



AiMY

FEMAIR SWING

エイミー フェムエア スイング AIM-FN074

安全にお使いいただくために	02
各部の名称とはたらき	07
ご使用前に	08
使いかた	10
お手入れについて	12
仕様	12
故障かな？と思ったら	13
保証とアフターサービス	14
保証書	裏表紙

このたびは、エイミー フェムエア スイングをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害*の発生が想定される危害・損害の程度。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者に関する注意

警告



必ず守る

医療機関で治療中の人や次のような人は必ず、使用する前に医師や理学療法士に相談する

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍(しゅよう)のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠中や出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要とする人
- ・体温 38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき
- ・現在、腰痛の人や、過去に首、腰、脚を傷めたことのある人
- ・首、腰、脚、手にしびれがある人
- ・呼吸器に障害のある人
- ・高血圧症の人
- ・内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある人
- ・腰痛(椎間板(つかんばん)ヘルニア、脊椎(せきつい)すべり症、脊椎(せきつい)分離症)などのある人
- ・変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
- ・骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなどの急性疼(とう)痛性疾患の人
- ・背骨に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人
- ・血行障害、血管障害など循環器に障害のある人
- ・リハビリテーションで使われる人
- ・上記以外、とくに身体に異常を感じている人

事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

次の人は使用しない

医師から運動やストレッチを禁じられている人
例：血栓(塞[そく]栓)症、重度の動脈瘤(りゅう)、急性静脈瘤(りゅう)、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

症状を悪化させるおそれがあります。



禁止

自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない

けがや故障のおそれがあります。



禁止

頭や首、腹部やふくらはぎなどには使用しない

とくに頭や首などは窒息のおそれがあり、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

本製品の使用時間は1回約10分以内とし、連続使用をさける

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。

注意



必ず守る

使用中痛み、めまい、吐き気、動悸など身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止する

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

**他の機器との併用はしない
また1人用機器のため複数の人が同時に使用しない**

事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない

また眠りながら使用しない

けがや体調不良をおこすおそれがあります。

使用に関する注意

警告



必ず守る

**必ず交流100Vで使用する
また付属のACアダプター以外は使用しない(型式:IVP1200-2000P)**

火災や感電、故障の原因になります。



必ず守る

**ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認する
(どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)**

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。



必ず守る

他製品に付属のACアダプターを使用しない

ACアダプターの故障につながります。また感電・ショート・発火の原因になります。



必ず守る

ACアダプターの電源プラグ・DCプラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



必ず守る

電源プラグのホコリなどは定期的にとる
ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。



必ず守る

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ずACアダプター本体を持って引き抜く

電源コードを持って引き抜くと、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



分解禁止

**絶対に分解・改造・修理をしない
また、本体のファスナーを開けない**

感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。



禁止

ACアダプターの取り扱いについては下記の項目に注意する

- ・傷つけたり、破損させたりしない
- ・加工しない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らない
- ・使用時には束ねない
- ・重いものを載せない
- ・挟みこんだりしない
- ・本体に巻きつけない
- ・コンセントへの電源プラグの差込みがゆるいときは使用しない

ACアダプターが破損し、火災や感電の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。



ぬれ手禁止

身体がぬれた状態では絶対に使用しない
感電や故障の原因になります。



禁止

装飾品などをつけて使用しない

機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。



禁止

本製品の上に立ち上がったたり、踏み台として使用しない

事故やけがのおそれがあります。とくに小さなお子様が進んだりしないようにご注意ください。



必ず守る

バランスをとる目的の商品のため、使用中、後ろや横に倒れないように十分注意する

事故やけがのおそれがあります。

使用に関する注意

⚠ 注意



使用前には、必ず各種ボタンが正常かつ安全に作動するか確認する
事故やけがのおそれがあります。



使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。



動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



雷、地震、停電のときは、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
停電復帰時に故障や事故、けがのおそれがあります。



体重が90kg以上の人は使用しない
事故やけがのおそれがあります。



裸で使用しない
また、エアークッション部分が背中、腰、尻などの皮膚に直接接触しないようにする
摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。



機構部に故意に力を入れて無理やり押さえない
けがや故障の原因になります。



座面中央部の突起を故意に押さえたり、倒したりしない
けがや故障の原因になります。



本製品に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない
火災・感電・故障の原因になります。また誤作動の原因になります。



操作ボタンを2つ以上同時に押さない
故障の原因になります。



本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない



本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない
感電や故障の原因になります。

使用場所についての注意

⚠ 注意



本製品は床や椅子などの平らで安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。



使用前に必ず本体の周囲約2m以内に人や物、ペットがいないことを確認する
事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。



床に対する傷が気になる場合は、薄手のマットを敷く
傷や凹みなどの損傷を防ぎます。



キャスター付の椅子、座面が回転する椅子など不安定な椅子などは絶対に使用しない
不安定な椅子で使用すると、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。



ソファや座布団など、座面が柔らかい場所で使用しない
事故やけが、故障の原因になります。



ストーブなどの火気の近くで使用したり、電気こたつの中や電気カーペットなどの暖房器具の上で使用しない
火災や事故、故障の原因になります。また、タバコを吸いながらの使用も、火災の原因になります。



本体に布や毛布などをかぶせて使用しない
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。



直射日光の当たるところでは使用しない
変形・変色・変質のおそれがあります。



お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない
感電・故障のおそれがあります。

保守についての注意

⚠ 注意



お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。



長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。




長期間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする
内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しないときは、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。



お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない
変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

各部の名称とはたらき

●本体

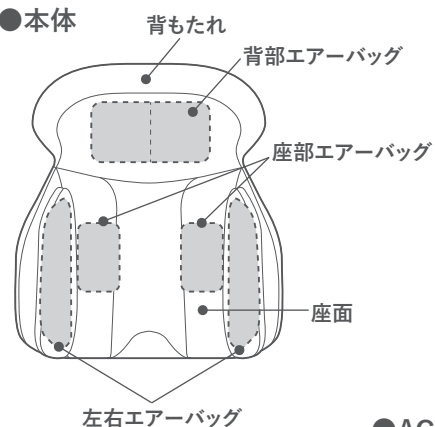


●本体斜視図




●ACアダプター (型式: IVP1200-2000P)

AC アダプター本体

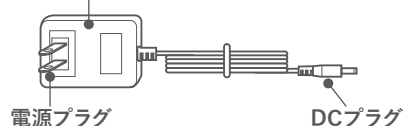

⚠ 注意 付属のACアダプター以外使用しない

●操作パネル

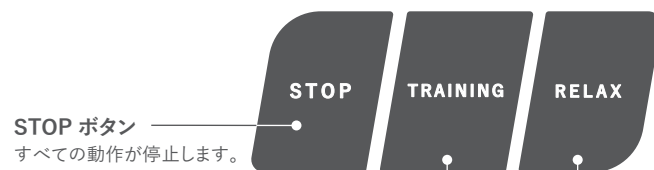

STOP ボタン
すべての動作が停止します。

AC アダプターを接続すると
「STOP」が赤く点灯します。

自動コース選択ボタン

プログラムされた2つの自動コースをお好みに合わせて選択できます。
ボタンを押すと、ボタンが青く点灯します。
もう一度押すと、ボタンが点滅し、エアの強さを変更できます。

TRAINING コース


RELAX コース

※各コースの特長は P10 をご参照ください。

ご使用前に

① 本体を設置する

床や安定した椅子でお使いいただけます。初めて使用される場合や慣れていない方は、後ろに壁がある所などでご使用ください。
床に対する傷などを気にされる方は、薄手のマットを敷いてご使用ください。

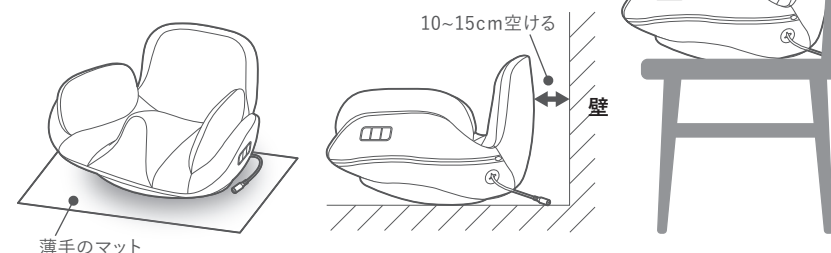

⚠ 注意

本製品を移動させるときに
背もたれや座面を掴まない



⚠ 注意

キャスター付の椅子、座面が回転する椅子など不安定な椅子などは絶対に
使用しない
ソファや座布団など、座面が柔らかい場所で使用しない

② 本体カバーが破れていないか確認する

⚠ 警告




ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認する
(どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、
修理を依頼してください)
布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

ご使用前に


③ AC アダプターと本体を接続し、コンセントに差し込む

- ① 本体の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを差し込みます。
- ② コンセントに AC アダプターの電源プラグを根元までしっかりと差し込みます。
- ③ 操作パネルの「STOP」が赤く点灯します。

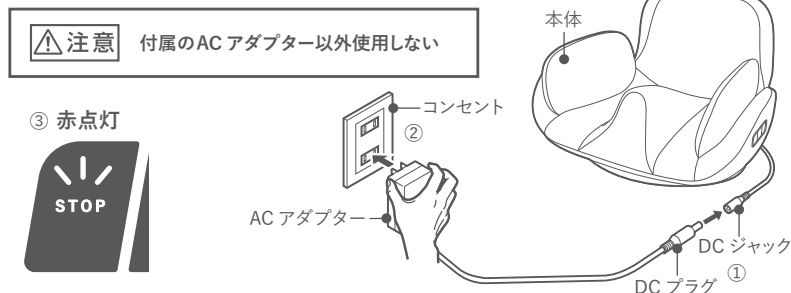


④ 座面に深く座り、背筋をのばし、座面中央の突起を太ももで挟む

しゃがんで、本体の手すりを持ち、ゆっくり座ります。

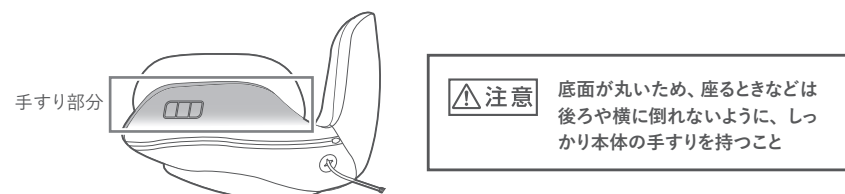

まっすぐ前を見て、座面に深く座り、背筋を伸ばしてください。
その後、座面中央の突起を、太ももで挟んでください。

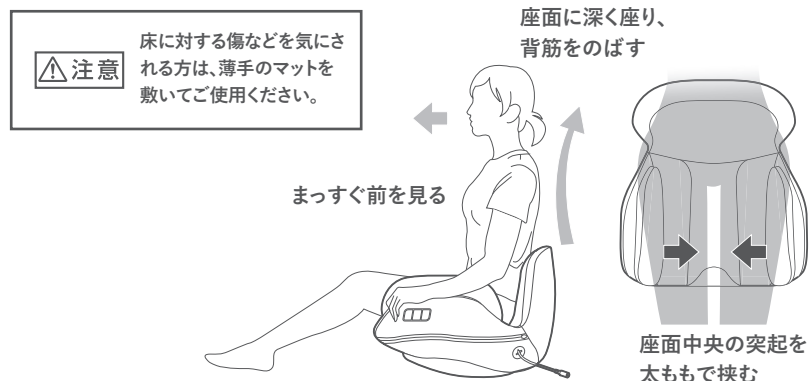

使いかた


本製品の特長

本製品は底面が丸くなっていることで、左右に揺れてトレーニングする目的で作られています。体力に自信のない方は RELAX コースからご使用になることをおすすめします。

① 自動コースを選択する

TRAINING コース／ベーシック・マイルド

TRAINING コースボタンを押すと、ランプが青く点灯し、「TRAINING」コースの「ベーシック」が開始します。もう一度押すと、ランプが点滅して、「TRAINING」コースの「マイルド」が開始します。

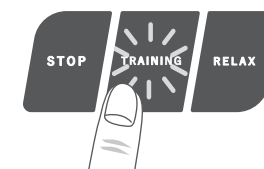

RELAX コース／ベーシック・マイルド

RELAX コースボタンを押すと、ランプが青く点灯し、「RELAX」コースの「ベーシック」が開始します。もう一度押すと、ランプが点滅して、「RELAX」コースの「マイルド」が開始します。



※約 10 分で自動的にコースが終了します。
※途中で終了するときは STOP ボタンを押してください。

コースの特徴

TRAINING	TRAINING コース	左右のエアーバックが交互に動作して、身体を左右に揺らしてトレーニングするコース
RELAX	RELAX コース	左右のエアーバックが同時に動作して、リラックスした状態で骨盤周りを全体的にケアするコース

使いかた

② タイマーがはたらき、自動でストップする

・約10分でタイマーがはたらき、動作がストップします。



警告

使用時間は1回約10分以内とし、連続使用を避ける
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上負担がかかり、
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。


動作を途中でやめる場合

STOP ボタンを押してください。

身体に異常を感じたり、非常事態が起こった場合

STOP ボタンを押して停止し、本体を身体から離してください。

③ 使い終わったら必ず AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜く

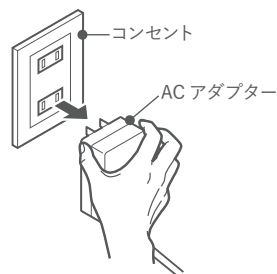

お手入れについて

本体・操作パネル

- ① かるい汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ② 汚れのひどいときは、水または中性洗剤を染み込ませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。
- ③ 自然乾燥でよく乾かしてください。



お手入れをするときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜く
またぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない

仕様

商品名・型番	エイミー フェムエア スイング・AIM-FN074
電気定格	AC100V 50/60Hz
消費電力	22W
ACアダプター定格	専用ACアダプター IVP1200-2000P 入力：AC100V 50/60Hz 0.8A 出力：DC12V 2.0A
耐荷重	90kg未満
オートタイマー	約10分
外形寸法	(約)幅 46 × 奥行 49.5 × 高さ 36cm 座面高さ 約16cm(先端)
質量	約 4.3kg (ACアダプター含まず)
ACアダプターコード長さ	1.8m
材質	構造部材：PP樹脂・ABS樹脂 クッション材：ウレタンフォーム 張り材：ポリエステル (機構部：ポリエステル/ポリウレタン)

中国製

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

こんな時は	原因	対処
動作しない	・コンセントから AC アダプターの電源プラグがはずれている。	・電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込み、操作パネルの STOP ランプが赤色に点灯しているか確認してください。
	・AC アダプターが本体に正しく接続されていない。	・本体の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグをしっかりと差し込み、操作パネルの STOP ランプが赤色に点灯しているか確認してください。
途中で止まった	・タイマーがはたらき、動作が止まっている。	・連続使用を避け、30 分以上時間をあけてから再度ご使用ください。
動作音が気になる	・エアーバッグがふくらむとき、しばむときの「ブシュー」「カチッ」という音。 ・ポンプが動くときの「ブーン」という音。 ・本体からの「バキッ」という音。	・構造上やむをえず発生するもので、機能などに影響はありません。
ACアダプターを接続した時またはコース終了時コースボタンが点滅する	・本体に異常がある。	・ただちに、STOP ボタンを押して、コンセントから AC アダプターの電源プラグを抜き、修理を依頼してください。

点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	こんな症状はありませんか ●電源コードやプラグが異常に熱い ●電源コードに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●動作中に異常な音や振動がする ●ボタンを押しても、ときどき運転しないことがある ●その他異常や故障がある	以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

■ 保証について

- (1) 保証書(裏表紙)
保証書はお買い上げ販売店で所定事項を記入しお渡し致します。所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- (2) 保証期間中の修理について
保証書の記載内容に従って修理をいたします。保証期間中でも有料になる場合もありますので、保証書の内容をよくお読みください。
- (3) 保証期間経過後の修理について
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買い上げ販売店にご相談ください。
- (4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5 年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- (5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料となります。(縫製品を含む)
- (6) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

■ アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。
アフターサービスをお申し付けの際は、下記内容をお知らせください。

型 番 …… AIM-FN074
故障状態 …… できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

■ 送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、弊社では原則センドバック方式（お客様にて弊社修理窓口に発送いただく方法）とさせていただきます。

往路：お客様負担 / 復路：弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

■ お客様相談窓口

ナビダイヤル（携帯 OK） 全国どこからでも市内通話料で OK

 0570-081-634

【受付時間】 祝日を除く月～金 10：00～17：00（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT 以外の一般回線、PHS、および IP 電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。その場合、下記電話番号へお掛けください。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL：03-3279-1511・1512 FAX：03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋 1-6-5