保証書

持込修理

エイミー ワーキングマッサージチェア AIM-261

ご購入日　　.　.

保証期間：お買い上げ日より1年間

お客様

お名前　　TEL

ご住所　〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1.取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

2.本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

❶ 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
❷ お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
❸ 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
❹ 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障、または損傷。
❺ 指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。

4.お客様の個人情報のお取扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。


製造販売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
www.tsukamoto-aim.co.jp

2025年12月 第四版発行

AiMY

WORKING MASSAGE CHAIR

エイミー　ワーキングマッサージチェア
AIM-261
管理医療機器
取扱説明書 添付文書　保証書付

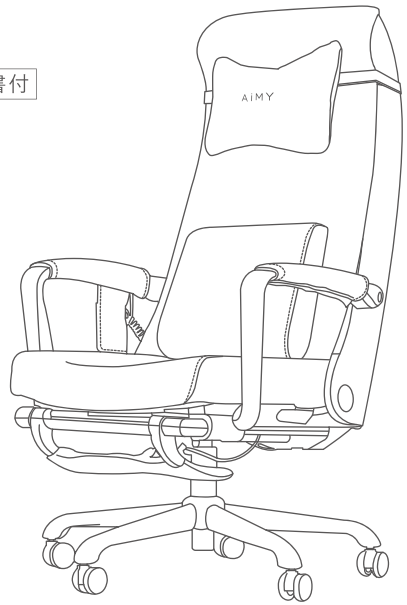

AiMY
WORKING MASSAGE CHAIR

エイミー ワーキングマッサージチェア　AIM-261

安全にお使いいただくために	2
各部の名称とはたらき	8
ご使用の前に	11
使いかた	12
Bluetooth機能の使いかた	14
マッサージ機能の使いかた	15
お手入れについて	18
仕様	19
故障かな？と思ったら	20
点検について	21
保証とアフターサービス	21
保証書	裏表紙

このたびは、エイミー ワーキングマッサージチェアを
お買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故ににつながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について

⚠警告　**取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。**

⚠注意　**取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。**

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取り扱い説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。

中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。

中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。

中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意

⚠警告

必ず守る **医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師に相談する**

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
・悪性腫瘍(しゅよう)のある人
・心臓に障害のある人
・妊娠中や出産直後の人
・糖尿病などによる高度な末しょう循環障害からくる知覚障害のある人
・施療部位に創傷のある人
・かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
・貧血症の人
・安静を必要とする人
・体温 38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき
・骨粗しょう症の人、脊椎(せきついの骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなどの急性疼(とう)痛性疾患の人
・温度感覚喪失が認められる人
・背骨に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
・乗り物酔いなどのめまい症状のある人
・上記以外に、とくに身体に異常を感じている人
・医療機関で治療中の人
・腱鞘炎の人
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

禁止 **次の人は使用しない**
医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓（塞［そく］栓）症、重度の動脈瘤（りゅう）、急性静脈瘤（りゅう）、各種皮膚炎、各種皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など症状を悪化させるおそれがあります。

禁止 **熱や痛みに敏感でない人はヒーター機能を使用しない**
低温やけどのおそれがあります。

禁止 **自分で意思表示ができない人や自分で操作できない人には使用させない**
事故やけがのおそれがあります。

禁止 **肌の弱い人は素肌で使用しない**
摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

⚠注意

必ず守る **安全にご使用いただくため、一番弱いモードからお試しください。**

必ず守る **使用中、身体に異常を感じたときは、ただちに使用をやめて医師に相談する**
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。

必ず守る **本製品の使用時間は1回15分以内とする**
長時間のご使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。
使用しても効果が感じられない場合は、医師または専門家にご相談ください。

必ず守る **本製品を安全にご使用いただくため、マッサージを受ける時はキャスターにロックをかけて本体が動かないようにしてから使用してください。**

禁止 **マッサージ以外の目的には使用しない**
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

禁止 **他の健康用機器や治療器と併用して使用しない**
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

禁止 **食後および飲酒後は使用しない**
体調不良をおこすおそれがあります。

禁止 **使用中は眠らない**
事故やけがのおそれがあります。

使用者に関する注意

⚠警告

必ず守る **ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認する（どんなに小さな破れでも、ただちに使用を中止し電源プラグを抜き、修理を依頼してください）**
布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

必ず守る **必ず交流100Vで使用する。また、付属のACアダプター以外は使用しない 専用ACアダプター(IVP1200-3000P)**
火災や感電の原因になります。

禁止 **電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない**
電源コードやプラグの誤った取り扱いは、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。次のことをお守りください。
・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
・電源コードを熱器具に近づけない。
・電源コードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
・電源コードが傷ついていたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
・電源コードを本製品に巻きつけない。
・電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。

必ず守る **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
感電や発熱による火災の原因になります。

必ず守る **電源プラグのホコリ等は定期的にとる**
プラグにホコリ等がたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

禁止 **首周辺をマッサージするときはもみ玉の動きに注意する**
また首前方はマッサージしない
事故やけがのおそれがあります。

禁止 **本体可動部やすき間などに頭、手や足などを入れない**
事故やけがのおそれがあります。

⚠注意

本体のカバーを外した状態、破れた状態で使用しない
本体のカバーが破れた場合は使用を中止し、修理を依頼する
必ず守る

使用中にACアダプターの電源プラグやDCプラグを抜かない
禁止
事故やけがのおそれがあります。

本体と床面との間に電源コード、リモコンコードを挟まない
禁止
事故やけがのおそれがあります。

子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない
禁止
事故やけがのおそれがあります。

子供を本体、付属品で遊ばせない
禁止
事故やけがのおそれがあります。

頭・胸・腹部のマッサージに使用しない
禁止
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

本体の上に立ったり、飛び跳ねたり不安定な姿勢で使用しない
禁止
事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。

絶対に分解や改造、修理をしない
また、本体のファスナーを開けない
分解禁止
感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。

身体がぬれた状態で本製品を使用しない
ぬれ手禁止
感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
ぬれ手禁止
感電の原因になります。

身体を本体に強く押し付けて使用しない
禁止
皮膚や筋肉を傷める原因になります。

身体にアクセサリーや、マフラーなどをつけて使用しない
禁止
機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。

直射日光の当たるところでは使用しない
禁止
変形・変色・変質のおそれがあります。

ご使用前には、必ずボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する
必ず守る
事故やけがのおそれがあります。

動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
プラグを抜く
漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。勝手に修理などせずお買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

本体のカバーをはずして使用しない
禁止
事故やけがのおそれがあります。

生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない
禁止
けがや故障の原因になります。

本体やリモコン、AC アダプターを落としたり、強い衝撃を与えない
禁止
火災や感電、故障の原因になります。

停電のときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜く
プラグを抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたままで通電が再開した場合、事故やけがのおそれがあります。

本体およびもみ玉に無理な力をかけたり、上に立ったり、座ったりまたは踏み台にしたりしない
禁止
けがや故障の原因になります。

本体のカバーが破れた場合は、勝手に修理などせず、販売店または製造販売店に連絡する。
禁止

使用前の本体のカバーの破れの有無を点検し、本体のカバーを外した状態、破れた状態で使用しない。本体のカバーが破れた場合は使用を中止し、修理を依頼する
禁止

操作ボタンを2つ以上同時に押さない
禁止
故障の原因になります。

ピンや金属類、燃えやすいものなどを本体に入れない
禁止
火災・感電・故障の原因になります。

本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない
禁止

本体やリモコン、ACアダプターに水などをこぼさない
水ぬれ禁止
火災や感電、故障の原因になります。

周囲に人やペットがいないか、物を置いていないか、必ず確認する
必ず守る
事故やけがのおそれがあります。

背もたれの後ろに障害物や人、動物がいないか確認してリクライニングする
また、リクライニングの角度を戻す時は背もたれに背をつけた状態で行う
必ず守る
事故やけがのおそれがあります。

リクライニングの角度を調整する際は、一度に体重をかけず必ずゆっくりとリクライニングする
禁止
事故やけがのおそれがあります。

施療部位に装身具をつけて使用してはならない
禁止

使用場所についての注意

⚠注意

周囲に障害物のない、床面が水平な場所に設置する
必ず守る
事故やけがのおそれがあります。

ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない
禁止
火災や事故、故障の原因になります。
また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない
禁止
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。

浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用・保管しない
水場使用禁止
故障や変形・変質のおそれがあります。

保守についての注意

⚠注意

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
プラグを抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。

長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
プラグを抜く
絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。

長期間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする
必ず守る
内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しない場合は、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。

しばらく使用しなかったときは、すぐに使用することを避ける
必ず守る
事故やけがのおそれがあります。しばらく使用していなかった本体を使用する場合は、機器が正常且つ、安全に作動することを確認してください。

本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ないところに整理、保管する
必ず守る

本製品を移動するときは、引きずらない
禁止
床や畳を傷つけるおそれがあります。

お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない
禁止
変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

本体に電源コードを差し込んだ状態で、椅子を回転させないでください
禁止
事故や部品の破損につながる場合があります。

使用目的

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

効能または効果


・疲労回復　・血行をよくする　・筋肉の疲れをとる　・筋肉のこりをほぐす
・神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

ご注意


効能や効果は個人により差があります

各部の名称とはたらき


●本体

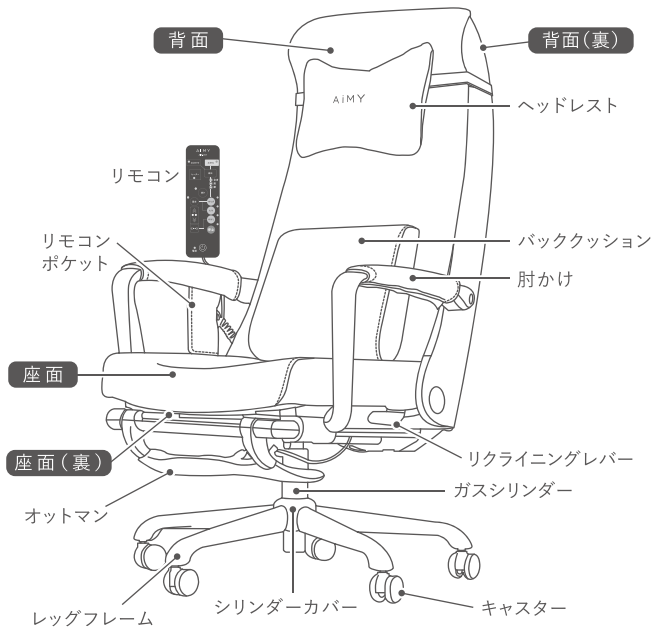

●右サイド

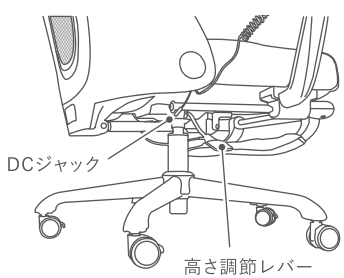

●背部

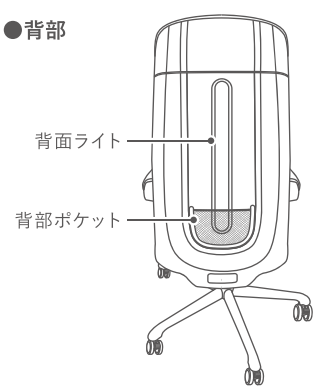


●付属品

キャスター×5




レッグフレーム
シリンダーカバー

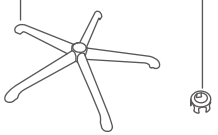

ガスシリンダー



バッククッション

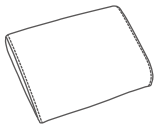

ヘッドレスト



シャフト



ピン



ボルト(小)×2




キャップ×2



六角レンチ



座面/背面

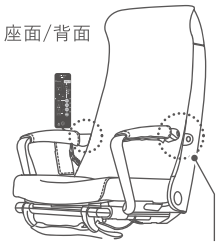


※ご購入時には両側のひじ掛けは固定されていません


取扱説明書



AC アダプター
（型式：IVP1200-3000P）

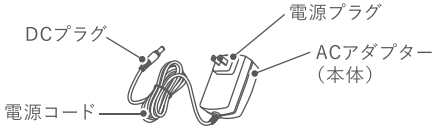


組み立て書

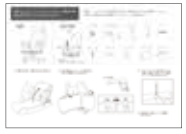

⚠警告 付属の AC アダプター以外は使用しないでください

●リモコン

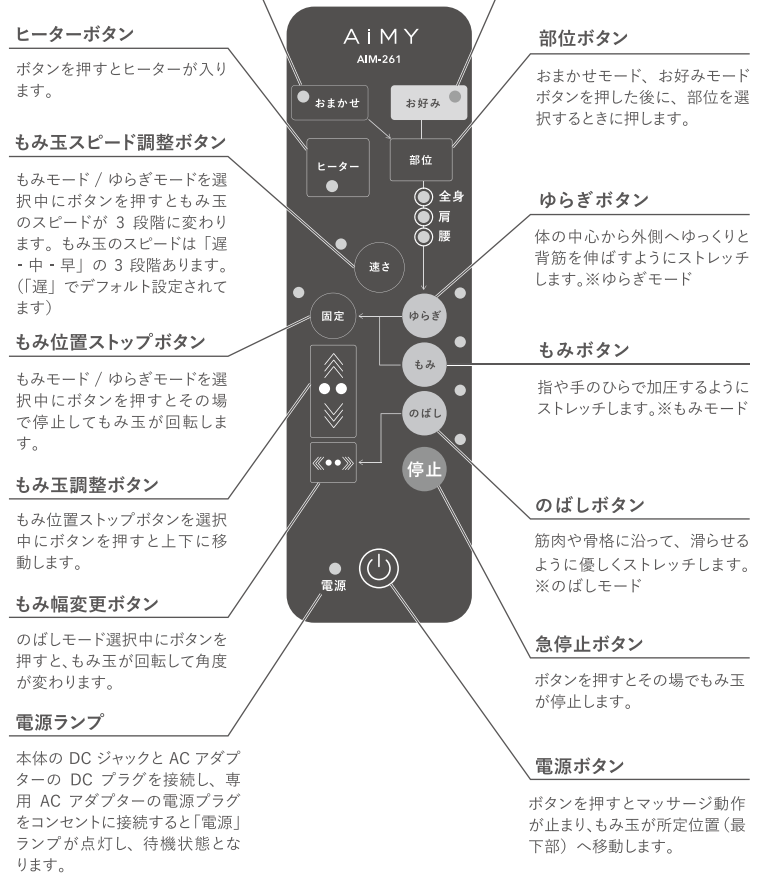

おまかせモードボタン

おまかせモードを使用するときに押します。

ヒーターボタン

ボタンを押すとヒーターが入ります。

もみ玉スピード調整ボタン

もみモード / ゆらぎモードを選択中にボタンを押すともみ玉のスピードが 3 段階に変わります。もみ玉のスピードは「遅 - 中 - 早」の 3 段階あります。（「遅」でデフォルト設定されてます）

もみ位置ストップボタン

もみモード / ゆらぎモードを選択中にボタンを押すとその場で停止してもみ玉が回転します。

もみ玉調整ボタン

もみ位置ストップボタンを選択中にボタンを押すと上下に移動します。

もみ幅変更ボタン

のばしモード選択中にボタンを押すと、もみ玉が回転して角度が変わります。

電源ランプ

本体の DC ジャックと AC アダプターの DC プラグを接続し、専用 AC アダプターの電源プラグをコンセントに接続すると「電源」ランプが点灯し、待機状態となります。

お好みモードボタン

お好みモードを使用するときに押します。

部位ボタン

おまかせモード、お好みモードボタンを押した後に、部位を選択するときに押します。

ゆらぎボタン

体の中心から外側へゆっくりと背筋を伸ばすようにストレッチします。※ゆらぎモード

もみボタン

指や手のひらで加圧するようにストレッチします。※もみモード

のばしボタン

筋肉や骨格に沿って、滑らせるように優しくストレッチします。※のばしモード

急停止ボタン

ボタンを押すとその場でもみ玉が停止します。


電源ボタン

ボタンを押すとマッサージ動作が止まり、もみ玉が所定位置（最下部）へ移動します。

ご使用の前に

周囲に障害物のない床面が水平な場所を選び設置します。
マッサージを始めるときは、キャスターにロックをして本体が動かないように固定してからご使用ください。
組み立てに関しては、同梱されている「組み立て書」をご覧ください。

1 本体を設置する

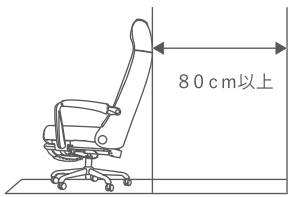

●背もたれの後ろに
８０cm以上の空間をあけてください。
●ホットカーペットなどの暖房機具の上には設置しないでください。
●チェアの位置を固定するにはキャスターのレバー下げるとロックがかかります。
●移動の際は、DCプラグを抜いてから移動してください。
ケガや事故、またはDCジャックが破損する恐れがあります。

2 本体カバーが破れていないか確認する

ご使用前は必ず本体カバー、バッククッション、ヘッドレストが破れていないか確認してください。布地が破れた状態で使用すると、重大な事故の原因となります。

3 ACアダプターと本体と接続し、コンセントに差し込む

ご使用前は必ず背面・座面・バッククッション・ヘッドレストが破れていないか確認してください。布地が破れた状態で使用すると、重大な事故の原因となります。

① 本体の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを根元までしっかりと差し込みます。
② コンセントに AC アダプターの電源プラグを根元までしっかりと差し込みます。
③ 接続すると背面ライトが青く点灯します。（マッサージ中は点滅します。）

⚠警告 **身体にアクセサリーや、マフラーなどつけて使用しない**

⚠注意 **本体可動部やすき間に、頭、手足などを入れない**

使いかた

⃠禁止 **コンセントにACアダプターの電源プラグが差し込まれた状態や、本体DCジャックにACアダプターのDCプラグを接続した状態で、椅子を回転させないでください**
事故や部品の破損につながる場合があります。

1 背もたれをお好みの角度に調整する

❶ 背もたれに重心を乗せた状態で、座面左側にあるリクライニングレバーを横に引きます。
❷ リクライニングの角度は床面に対して、約 108° ～ 134° の間で調整できます。
❸ お好みの角度の状態で引いている状態のリクライニングレバーを元の位置まで押して、背もたれを固定します。
❹ リクライニングレバーを横に引いた状態で、体重をかけずにいると背もたれが戻ります。



⚠注意 **背もたれの後ろに障害物や人、動物がいないか確認してリクライニングする**
また、リクライニングの角度を戻す時は背もたれに背をつけた状態で行う
事故やけがのおそれがあります。

リクライニングの角度を調整する際は、一度に体重をかけず必ずゆっくりとリクライニングする
事故やけがのおそれがあります。

2 座面をお好みの高さに調整する

❶ 座面に体重を乗せた状態で、座面右側にある高さ調節レバーを上に引くと座面が下降します。

❷ 座面に腰を浮かせた状態で、座面右側にある高さ調節レバーを上に引くと座面が上昇します。

❸ 座面が下げらない場合、深く座り直して体重をかけてください。


⚠注意 **高さ調節レバーは押し下げないでください**
事故やけがのおそれがあります。

3 オットマンの使いかた

❶ 座面の下からオットマンを矢印（←）の方向に引き出します。

❷ オットマンを矢印（↰）の方向に開きます。

❸ 収納の際は、オットマンを元の位置まで（❷の逆方向に）戻し、座面に収納しオットマンを利用前の位置に戻します。

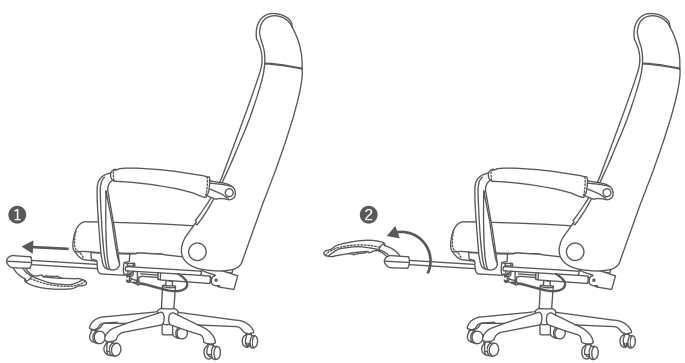

⚠注意 **オットマンの角度は調節することができないため、ご使用の際はオットマンを完全に引き出し、収納の際は完全に戻すようにしてください**

オットマンを無理に引いたり、押し込んだりする動作はやめてください
けがや故障の原因になります。

可動部分に手や足を挟まないようご注意ください。
けがや故障の原因になります。

Bluetooth機能の使いかた

本体に内蔵されている Bluetooth に接続することで、ワイヤレスで本体のスピーカーから音を流すことができます



■ 接続方法

① 本体に電源が入っていることを確認します。

② 携帯端末の Bluetooth が ON になっていることを確認します。

③ Bluetooth 対応端末のデバイス一覧の「AIM-261」をタップすると接続されペアリング状態になります。

④ 接続された際、本商品から効果音が流れます。

⑤ Bluetooth を切断する際は、接続している端末のデバイス一覧の「AIM-261」を削除してください。

■ 接続がうまくいかなかった場合

・ スマートフォンの Bluetooth 接続を一度解除して、最初からやり直してください。

・ 接続する側の機器が他の周辺機器と Bluetooth 通信を行っている時は本商品と接続できない場合があります。その際は他の機器との接続を解除した上で再度ペアリングしてください。

・ 接続する際の Bluetooth 通信や接続された状態で長時間経過した場合または本体との距離が離れた場合、接続が切れる場合があります。その際は初めからの手順で再度接続をしてください。

・ 最後に使用した機器とのペアリングが有効な時、他の機器との接続ができない場合があります。その際は接続する側の機器の登録を一度解除・削除してください。

・ 各機器付属の取扱説明書を参照して接続方法・接続解除方法等ご確認ください。

マッサージ機能の使いかた

1 「マッサージモード」を選択する

DC ジャックに DC プラグが差し込んであるか確認してください。
電源プラグがコンセントに差し込んであるか確認してください。

おまかせモード（約15分）

❶「電源」ランプが点灯した状態で「おまかせモードボタン」を押すと「おまかせ」ランプと、「全身」ランプが点灯し、「おまかせモード」が作動します。

❷「部位ボタン」を押すと、「肩」ランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」を押すと「腰」ランプが点灯します。

部位ランプ点灯時のマッサージ位置	
全身	「肩」から「腰」にかけて全体をマッサージします
肩	「肩」まわりを念入りにマッサージします
腰	「腰」まわりを念入りにマッサージします

お好みモード（約15分）

ゆらぎモード

①「お好みモードボタン」お好み を押すと「お好みモードボタン」お好み のランプ、「全身」ランプ、「ゆらぎボタン」ゆらぎ のランプが点灯し、「**ゆらぎモード**」が作動します。

②「部位ボタン」部位 を押すと「肩」ランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」部位 を押すと「腰」ランプが点灯します。

③「ゆらぎボタン」ゆらぎ のランプが点灯中に「もみ位置ストップボタン」固定 を押すと「もみ位置ストップボタン」固定 のランプが点灯し、もみ玉の上下の動きが固定されます。

④「もみ位置ストップボタン」固定 のランプが点灯している時に、「もみ玉調整ボタン」 を押すともみ玉が上下に移動します。

「⩓」を押し続けるともみ玉が回転しながら上へ移動し、離すと移動を停止します。
「⩔」を押し続けるともみ玉が回転しながら下へ移動し、離すと移動を停止します。

⑤ 動作中に「もみ玉スピード調整ボタン」速さ を押すと「もみ玉スピード調整ボタン」速さ のランプが点灯し、もみ玉のスピードが変わります。

⑥ スピード調整機能の一番遅いスピード選択時、背中に強い力を加えると自動的に電源が切れます。その際は電源ボタン ⏻ を押して、再度コースやモードを選択してください。



もみモード

①「お好みモードボタン」お好み を押すと「お好みモードボタン」お好み のランプ、「全身」のランプ、「ゆらぎボタン」ゆらぎ のランプが点灯します。
「もみボタン」もみ を押すと、「**もみモード**」が作動します。

②「部位ボタン」部位 を押すと「肩」のランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」部位 を押すと「腰」のランプが点灯します。

③「もみボタン」もみ のランプが点灯中に「もみ位置ストップボタン」固定 を押すと「もみ位置ストップボタン」固定 のランプが点灯し、もみ玉の上下の動きが固定されます。

④「もみ位置ストップボタン」固定 のランプが点灯している時に、「もみ玉調整ボタン」 を押すともみ玉が上下に移動します。

「⩓」を押し続けるともみ玉が回転しながら上へ移動し、離すと移動を停止します。
「⩔」を押し続けるともみ玉が回転しながら下へ移動し、離すと移動を停止します。

⑤ 動作中に「もみ玉スピード調整ボタン」速さ を押すと「もみ玉スピード調整ボタン」速さ のランプが点灯し、もみ玉のスピードが変わります。

⑥ スピード調整機能の一番遅いスピード選択時、背中に強い力を加えると自動的に電源が切れます。その際は電源ボタン ⏻ を押して、再度コースやモードを選択してください。




のばしモード

①「お好みモードボタン」お好み を押すと「お好みモードボタン」お好み のランプ、「全身」ランプ、「ゆらぎ」ランプが点灯します。
「のばしボタン」のばし を押すと「**のばしモード**」が作動します。

②「部位ボタン」部位 を押すと「肩」のランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」部位 を押すと「腰」のランプが点灯します。

③「のばしボタン」のばし のランプが点灯中に「もみ幅変更ボタン」 を押すと、もみ玉の角度が変わり、もみ玉の力をお好みで調節することができます。

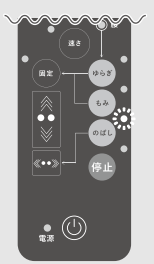

2 お好みに合わせてヒーターを選択する

電源ボタンが点灯した状態で「ヒーターボタン」ヒーター を押してください。
「ヒーターボタン」ヒーター のランプが点灯し、もみ玉が赤く光ります。

■ オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約 15 分で自動的に止まり、もみ玉が元の位置に戻ります。

■ 自動コースを途中でやめるには

リモコンの「電源ボタン」⏻ を押してください。
動作が止まり、もみ玉が所定位置（最下部）へ移動します。

■ 身体に異常を感じたり、非常事態がおこった場合には

リモコンの「急停止」ボタンを押してください。その場で動作が停止します。
電源ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ ご使用時間について

本製品の使用時間は1回 15 分とし、連続使用はしないでください。
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

⚠注意

背もたれの後ろに障害物や人、動物がいないか確認してリクライニングする
また、リクライニングの角度を戻す時は背もたれに背をつけた状態で行う
事故やけがのおそれがあります。

リクライニングの角度を調整する際は、一度に体重をかけず必ずゆっくりとリクライニングする
事故やけがのおそれがあります。

使用後は背もたれを完全に起こし、オットマンを完全に元の位置に戻す
事故やけがのおそれがあります。

3 マッサージモードとBluetooth機能をご使用の際以外は、DCプラグを抜いてACアダプターは床から離れた場所で保管してください。

事故や部品の破損につながる場合があります

お手入れについて

① 本体やリモコン、バッククッション、ヘッドレストについた汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。

② 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。ただし、本体内部に水などが入らないようにご注意ください。

③ 自然乾燥させよく乾かしてください。

ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない
ぬれ手禁止
感電の原因になります。

直射日光の当たるところでは使用しない
禁止
変形・変色・変質のおそれがあります。

絶対に分解・改造・修理をしない
分解禁止
感電の原因になります。
また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。

お手入れの際は、必ず AC アダプターをコンセントから抜く
プラグを抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。

湿気の多いところで使用・保管しない
禁止
本体、付属品などは次回の使用に支障のないように掃除をし湿気の少ないところで整理、保管してください。事故やけがのおそれがあります。

お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しない
禁止
変形や変色、変質など本体の外装を傷めるだけでなく、ひび割れによるけがのおそれがあります。

保管について

使用後は直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
また、長期間使用しない場合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようにご注意ください。

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、破棄するときは、各自治体の取り決めにしたがってください。

⚠注意 **本体を保管する時は、コード類はねじれをほどいて保管する**

仕様

販売名	エイミー ワーキングマッサージチェア　AIM-261
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
医療機器認証番号	305AGBZX00040000
使用電源	専用ACアダプター（IVP1200-3000P）
電気定格	ＡＣ100Ｖ 50/60Hz 30W(電熱装置6.2W含む)
本体定格	ＤＣ12Ｖ ⎓29W(電熱装置6.2W含む)
定格時間	15分
オートタイマー	15分
外形寸法	(約)幅64×奥行74～142×高さ95～112cm
	座面高さ41～51cm
質量	約18.6kg
電源コード長さ	約1.8m
材質	構造部材：スチールパイプ
	張り材：ポリエステル、ナイロン
	クッション材：ウレタンフォーム
耐荷重	約100kg
医療機器製造販売業	株式会社ツカモトコーポレーション　エイム事業部
	〒103-0023　東京都中央区日本橋本町1-6-5
医療機器製造販売業許可番号	13B2X10398
原産国	中国

（⎓）記号は、直流電圧を表します。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。
それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんな時は	考えられる理由	このように処置してください
動作中の音が気になる	○もみ玉が動作するときの「ウィーン」「カチッ」「ジー」音。 ○もみ玉が移動するときの「ウィーン」「カチッ」音。	構造上発生するもので異常ではありません。
動作しない	○コンセントからACアダプターの電源プラグがはずれている。	電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。
	○本体とACアダプターが正しく接続されていない。	本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを差し込んでください。
使用中に止まった	○タイマーがはたらき、動作が止まっている。	30分以上時間をあけてから操作をしてください。
リモコンランプが同時に全て点滅する	**物が挟まった場合** ○もみ玉に無理な力がかかり安全装置がはたらき、動作が止まっている。	電源プラグをコンセントから抜いてください。もみ玉に挟まっている物を取り除いてください。その後電源プラグをコンセントに差し込み「電源ボタン」を押すと、もみ玉が最下部へ移動します。
	もみ玉に負担がかかった場合 ○もみ玉に無理な力がかかり安全装置がはたらき、動作が止まっている。	もみ玉に負荷がかかっていない状態（本体から降りるなど）で電源ボタンを押してください。もみ玉が最下部へ移動します。 リモコンランプがすべて点滅した状態が変わらない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 1時間ほど時間をあけてから再度、電源プラグをコンセントに差し込み、動作を確認してください。
	○モーターの温度上昇により、安全装置が働き、もみ玉動作が止まっている。	

点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



こんな症状はありませんか

●電源コードやプラグが異常に熱い　●電源コードに深い傷や変形がある　●焦げ臭いにおいがする　●動作中に異常な音や振動がする　●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある　●その他異常や故障がある

以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

※必ずお読みください

■保証について

(1) 保証書（裏表紙）

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理をいたします。保証期間中でも有料になる場合もありますので、保証書の内容をよくお読みください。

(3) 保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買い上げ販売にご相談ください。

(4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料となります。

(6) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼ください。

お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

■アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。
アフターサービスをお申し付けの際は、下記内容をお知らせください。

型　　番 …… AIM-261
故障状態 …… できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

■送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、弊社では原則セントバック方式（お客様にて弊社修理窓口に発送いただく方法）とさせていただきます。

往路：お客様負担 / 復路：弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

■お客様相談窓口

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

ナビダイヤル（携帯 OK）全国どこからでも市内通話料で OK

0570-081-634

【受付時間】祝日を除く月～金 10:00 ～ 17:00（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT 以外の一般回線、PHS、および IP 電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

MEMO